


BalanceLink 安装与操作说明

(中文 2.20 版)

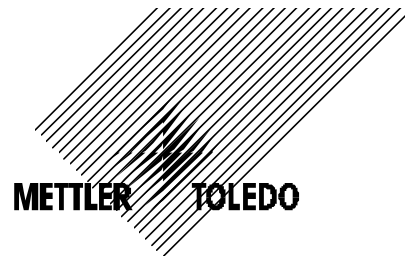

一. 连接与安装

1. 硬件连接

用电缆线将天平上的 I/O 数据接口与 PC 机上的九针串行端口 (如 COM2) 相连接。

电缆线选择: (1) ME-33783 (AT, PM, UMT 选用, AE 需再另加配 012 数据接口)。

(2) ME-229065 即 LC-RS9 (G, R 系列选用, B 系列需再另加配 LC-B 数据接口)。

2. 安装

在 Windows 环境下安装 BalanceLink

- 选择 Windows3.1 以上版本。
- 单击开始菜单, 选择 Run, 键入 A:\ESETUP 或 B:\ESETUP, 按回车, 然后根据指令进行安装。
- 当你第一次运行 BalanceLink 时, 你将被提示填写注册表。

在 DOS 环境下安装 BalanceLink

- 选择 DOS6.0 以上版本。
- 在 A 盘或 B 盘提示符下键入: INSTALL C:\BALINK。也可按你的要求修改目标路径。
- 在 DOS 方式下, 输入 PRINT BALINK.TXT 可以打印出英语说明书。重要的信息可由帮助文件 BALINK.HLP 提供。
- 为了注册 BalanceLink, 你必须运行 LICENSE.COM 程序。注册后, 你必须重新启动 BalanceLink。

二. 菜单设置

菜单一览表

文件 (F)	编辑 (E)	视图 (V)	配置 (C)	选项 (O)	帮助 (H)
得到配置 (L)	重做 (U)	在窗口中输入 (W)	接口 (I)	过滤天平结果 (F)	索引 (I)
存储配置 (S)	剪切 (T)	工具条 (T)	发送命令 (S)	天平结果 (B)	键盘 (K)
退出 (X) Alt+F4	拷贝 (C)	状态条 (S)	蜂鸣输入 (B)	修改天平结果 (M)	怎样使用帮助 (U)
	粘贴 (P)			结果至光标 (R)	声明 (D)
	删除 (L)			结果至文件 (E)	关于 BalanceLink (A)
	选择所有项 (A)				
	清除所有项 (R)				

1. 文件

- 得到配置
BalanceLink 可在 Word、Excel、Lotus 等软件中使用, 已安装了不同环境下的参数及数据文件, 可通过此栏调出。
- 存储配置
可以通过此栏保存修改后的参数或数据结果。
- 退出
当工作结束后, 可通过此栏退出程序。

2. 编辑

- 这里的所有选项提供了对 BalanceLink 客户区窗口的天平回送数据的一些编辑功能。

3. 视图

- 在窗口中输入
选择此栏将使天平的返回结果输出至客户区窗口, 否则, 则显示主画面。
- 工具条
选择此栏可在客户区上端创建一系列图标, 它们分别对应菜单中相应的命令。
- 状态条
选择此栏可在客户窗口下端创建一状态条, 在此栏中可动态的解释对应菜单中相应的命令。

4. 配置

- 接口
此栏用来对天平与计算机通信参数进行设置或修改, 如: 波特率、奇偶校验位、数据位、停止位、端口号、天平类型等。所选参数必须与天平所取参数一致, 否则, 天平无法响应。
- 发送命令
在此栏中可以设定每次命令的发送时间间隔以及选定热键等。
- 蜂鸣输入
选择此项可使每次输入命令进入天平时, 发出声音。

5. 选项

- **过滤天平结果**
包括对数值接受范围及模式进行设定, 还有对动态数值、去皮、切换信息、错误信息等选项。
- **天平结果**
此栏输出数据的最终结果。
- **修改天平结果**
此项可以对输出数据格式和数据结果进行修改和替换。(见图 1)
- **结果至光标**
此栏将数据送至光标所指定的位置。
- **结果至文件**
此栏将数据保存在指定的文件内。

6. 帮助

- **索引**
此栏存放菜单的目录。
- **键盘**
此栏提示可以通过键盘来进行操作。
- **怎样使用帮助**
此栏详细说明帮助文件的使用方法及目录。
- **声明**
这里是说明了本软件的版权问题。
- **关于 BalanceLink**
此栏提示天平是否与计算机连接上。

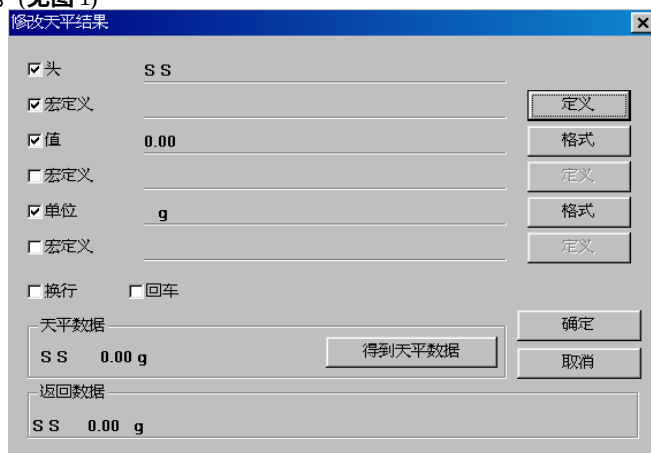


图 1

三. 操作使用

1. 启动联机

- 进入 Windows 状态后, 启动文件 Balink.exe 进入 BalanceLink。
- BalanceLink 现在试图连接串行口 COM2。如果这个端口被占用了(例如被鼠标占用), 你将得到一个警告信息, 这样你要选择 配置--接口 菜单并进行更改。
- 在 配置 菜单中的 发送命令 栏决定命令发送方式。如设置快捷键(F2)、发送时间间隔等, 控制天平向计算机输出。你能通过文件菜单下的得到 配置 选项得到不同应用程序的配置, 现在你可以按你的需求选择视图, 配置和选择菜单了。
- 在 选项 菜单中更改天平输出数据格式。

2. 数据输入

- 切换至 Excel 等应用软件中, 打开一文件。
- 将鼠标定于任一空格, 单击一次, 按快捷键一次, 天平数值即被输入该处。
- 选择任一处理工具, 即可对数值进行相应处理。(累加、比较、制表、打印、制图等)。(见图 2)

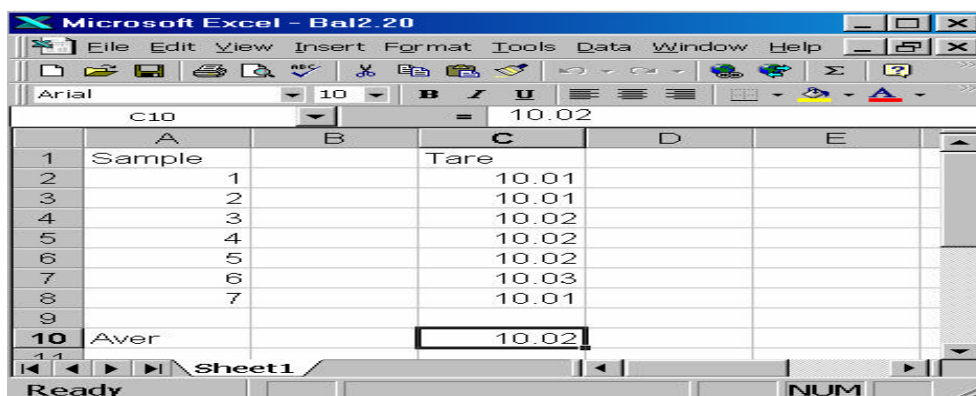


图 2

技术参数以及仪器配件的更改, 恕不另行通知

梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司
上海市桂平路 589 号 邮编: 200233

电话: 021-64850435

传真: 021-64853351

北京办事处

北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 409 室 邮编: 100045 电话: 010-68045557 传真: 010-68018022

西安办事处

西安市朱雀门内伟业大厦 A-12-P 邮编: 710002 电话: 029-7203500, 7285983 传真: 029-7203501

广州办事处

广州东风东路 836 号东峻广场 1 座 1901 室 邮编: 510080 电话: 020-87672621 传真: 020-87605243