


Zusatzblatt zu Bedienungsanleitung

< Bidirektionale Datenschnittstelle der
J-Waagen, Option 018 >

METTLER TOLEDO

METTLER TOLEDO **Option 019**

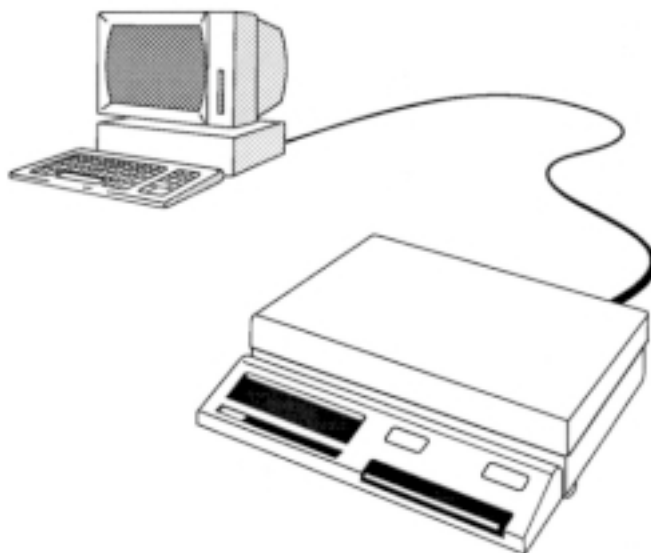

Beschreibung

In den Waagen PJ12, PJ15 und PJ1220 DeltaRange® ist die bidirektionale Datenschnittstelle in der Waage bereits vorgesehen. Mit dem Einsetzen der Option 019 (spezielle Programm-Kassette) wird diese bidirektionale Datenschnittstelle aktiviert.

Beachten Sie bitte die Unterschiede gegenüber der Bedienungsanleitung Option 018 auf der Rückseite dieses Zusatzblattes!




P703252

Technische Änderungen und Änderungen
im Lieferumfang des Zubehörs vorbehalten.


© Mettler-Toledo GmbH 2000 703252 Printed in Switzerland 0009/31.11

Mettler-Toledo GmbH, Laboratory & Weighing Technologies, CH-8606 Greifensee, Switzerland
Phone +41-1-944 22 11, Fax +41-1-944 30 60, Internet: <http://www.mt.com>

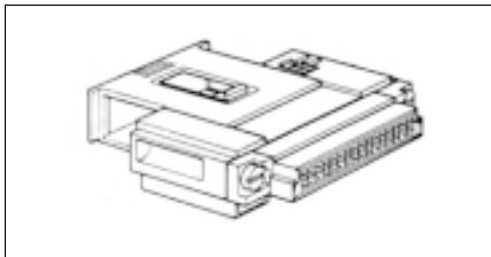

Seite 2:

Wie schon in der Beschreibung auf der Vorderseite erwähnt, ist die bidirektionale Datenschnittstelle bei den Waagen PJ12, PJ15 und PJ1220 DeltaRange® ab Fabrik bereits vorgesehen. Somit erübrigt sich der Einbau einer separaten Platine, es braucht nur noch die Option 019 (spezielle Programm-Kassette) eingesetzt zu werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

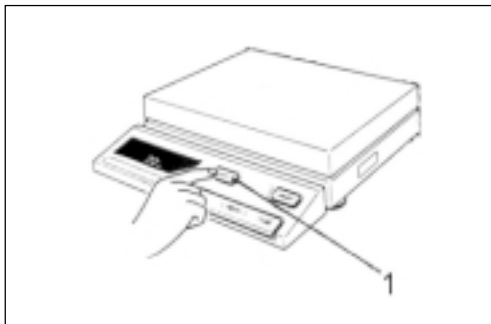


Achtung:


Die Programm-Kassette darf nie bei eingeschalteter Waage herausgezogen oder eingesetzt werden, da sonst die Gefahr besteht, dass in der "Soft-ware", d.h. im Programm der Waage, Störungen auftreten können.

Daher:

OFF-Taste 1 drücken!

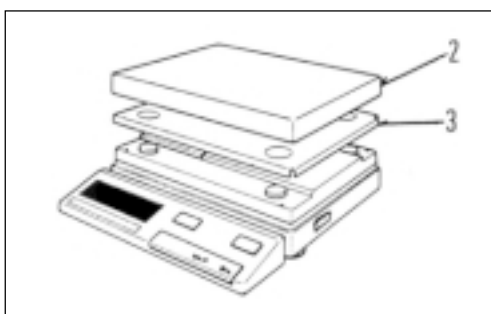

Lastplatte **2** und Lastträger **3** abheben.

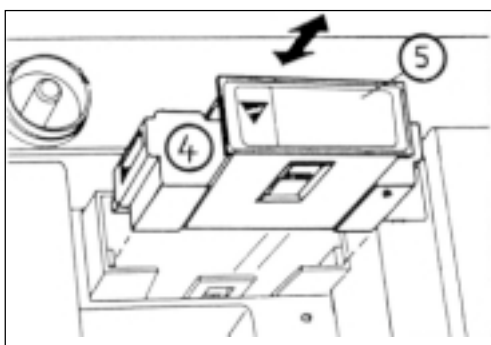


Eingesetzte Programm-Kassette **4** am Bügel **5** fassen und sorgfältig herausziehen.

Neue Programm-Kassette **4** (**Option 019**), sorgfältig einschieben bis die Kassette hörbar einrastet.


Hinweis: Die entfernte Programm-Kassette sollte an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.

Lastträger und Lastplatte wieder auflegen, dann Waage einschalten.

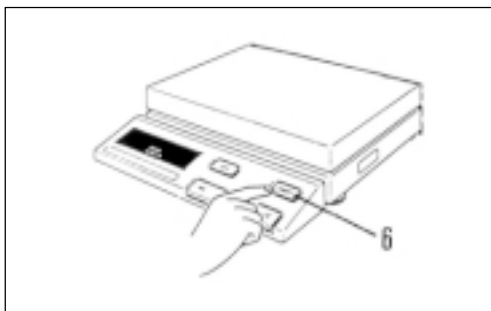

Seite 3:

Der Printbefehl wird bei den Waagen PJ12, PJ15 und PJ1220 DeltaRange® nicht mit der Bedientaste wie bei den übrigen J-Waagen ausgelöst, sondern mit der dafür vorhandenen PRINT-Taste **6** auf dem Terminal.

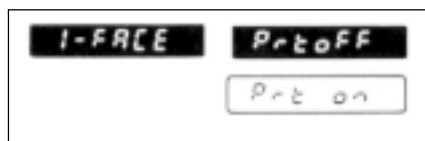

Die Anzeigen "Prt off" und "Prt on" unter I-FACE erscheinen bei diesen Waagen folglich nicht.