

Analyzátory vlhkosti



HE53

Halogénový analyzátor vlhkosti

Spořadhlivé výsledky

Ľahká obsluha

Cenovo dostupná kvalita



Na vlhkosti záleží
Ľahká a rychlá analýza

METTLER TOLEDO

Spoločiteľ, jednoduché a cenovo dostupné

Skvelá investícia do kvality

Halogénový analyzátor vlhkosti HE53 predstavuje spoľahlivé a cenovo dostupné riešenie na meranie obsahu vlhkosti vo vašich výrobkoch. Umožní zachovať ich kvalitu a zaistiť optimálnu trvanlivosť. Tento robustný a cenovo dostupný analyzátor vlhkosti ťaží zo skúseností spoločnosti METTLER TOLEDO v oblasti výroby meracích prístrojov a z dlhoročných znalostí v odbore analýzy vlhkosti.

Používanie HE53 zvládne aj nezaškolená obsluha. Vďaka pomocníkovi na monitore a nášmu Sprievodcovi meraním vlhkosti, ktorý poskytujeme zdarma, máte všetko, čo potrebujete na rýchle nastavenie prístroja a začatie presného merania vlhkosti. Vďaka švajčiarskej konštrukcii získate nielen dôveryhodné výsledky merania vlhkosti, ale aj istotu perfektného výkonu na mnoho rokov dopredu.

Spoločiteľ výsledky



Prístroj HE53 poskytuje presné a opakovateľné merania vlhkosti v priebehu niekoľkých minút.

- Spoločiteľnosť
- Efektivita
- Vyššia produktivita

Cenovo dostupná kvalita



Vďaka halogénovej technológii sušenia a vysoko výkonnej vážiacej jednotke získate výborný pomer kvality a ceny.

- Moderná technológia
- Robustná konštrukcia
- Dlhá životnosť prístroja

Odbornosť v oblasti merania vlhkosti



Využite naše know-how na všetko, čo potrebujete pre okamžitú analýzu vlhkosti.

- Rýchle nastavenie
- Školenie on-line zdarma
- Metódy sušenia k okamžitému použitiu



Rýchle výsledky merania v jednoduchých 3 krokoch

Analýza vlhkosti nikdy nebola taká ľahká – stačí sledovať grafický návod na obrazovke a výsledky budete mať v priebehu niekoľko málo minút.



1. Vytarajte prázdnu vážiacu misku.



2. Pridajte vzorku a rovnomerne ju rozťahnite.




3. Stlačte tlačidlo Start.
V priebehu niekoľkých minút odčítajte výsledky na monitore

METTLER TOLEDO Service

Naša celosvetová servisná sieť je vždy po ruke. Pomôže Vám s kalibráciou a údržbou, aby váš analyzátor vlhkosti fungoval vždy na sto percent.

Technické údaje HE53

Váživosť	54 g
Odčítateľnosť	1 mg, 0.01% MC
Opakovateľnosť	0,15 % (2 g vzorka) 0,05 % (10 g vzorka)
Vypínanie	Plne automatické, časovač
Teplotné programy	Štandardný, rýchly
Teplotný rozsah	50—160 °C (1 °C prírastok)
Technológie ohrevu	Halogén
Režimy zobrazenia	%MC, %DC, %ATRO MC, %ATRO DC, g
Displej	LCD, podsvietený
Funkcie displeja	Sprievodca nastavením, ukazovateľ priebehu
Hmotnosť	4,1 kg

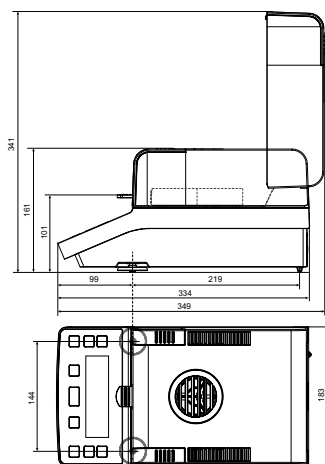

Príslušenstvo



Hliníkové misky na vzorky

Vhodné pre všetky aplikácie.
Zaisťujú najlepšiu opakovateľnosť
výsledkov.

Obj. číslo 13865

Filtre zo sklenených vlákien

Vhodné na kvapaliny a pasty
na zlepšenie opakovateľnosti
a skrátenie trvania merania až
o 50 %.

Obj. číslo 21464

Tlačiarne

Najrýchlejší spôsob
dokumentácie výsledkov
meraní vlhkosti.

Obj. číslo
11124300 (RS-P25)
11124303 (RS-P26)

Sprievodca meraním vlhkosti zdarma



Všetko, čo potrebujete vedieť:

- Inštalácia
- Ovládanie
- Vzorky
- Rutinné skúšky

www.mt.com/moisture

Česko

Mettler-Toledo, s. r. o.

Třebohostická 2283/2, 100 00 Praha 10
Tel.: +420 226 808 150, Fax: +420 226 808 170
Servis: +420 226 808 163, E-mail: sales.mtcz@mt.com

Slovensko

Mettler-Toledo s. r. o.

Hattalova 12, 831 03 Bratislava
Tel.: +421 2 44 44 12 20, 22, Fax: +421 2 44 44 12 23
Servis: +421 2 44 44 12 21, E-mail: predaj@mt.com

Technické zmeny vyhradené, 30097228

© 11/2014 Mettler-Toledo, s.r.o.

Vytlačené v Českej republike