


Spoločiteľné výsledky na dosah Váženie bez starostí, 1 mg



Kovová skrinka zabezpečí dlhú životnosť váhy

Skrinka z odliatku hliníka nielenže chráni snímač zariadenia od vplyvov prostredia a nárazov, ale je tiež odolná chemikáliam, vrátane acetónu.

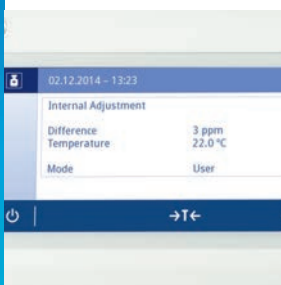

Osvedčený snímač zariadenia dáva spoľahlivé výsledky

Vynovený snímač zariadenia MonoBloc s automatickou justážou FACT dodáva neustále spoľahlivé výsledky. Zabudovaná ochrana proti preťaženiu zabezpečuje dlhú životnosť váhy.



Funkcia MinWeigh pomáha pri dávkovaní

Počas navažovania, údaj váženia zostane červený, pokiaľ čistá hmotnosť vzorky nepresiahne predprogramovanú minimálnu hodnotu. Dosiachnutie procesných tolerancií je ľahko viditeľné.



Zjednodušené nastavenie do vodorovnej polohy

Zabudovaná funkcia LevelControl dá varovanie, ak váha nie je vo vodorovnej polohe. Tiež vám robí sprievodcu na obrazovke, ktorý pomôže váhu správne nastaviť do vodorovnej polohy za niekoľko sekúnd.



Presné váhy MS-TS

Skonstruované pre spoľahlivú prevádzku

Robustná konštrukcia presných váh MS-TS ich predurčuje pre náročné úlohy v laboratóriu alebo vo výrobných priestoroch. Jedinečný snímač zariadenia MonoBloc poskytuje presnosť, ktorú potrebujete a je plne chránený proti preťaženiu.

Poskytujú neustále spoľahlivé výsledky, dokonca aj v drsnom prostredí, tieto váhy vám tiež rýchlo vrátia vašu investíciu do nich.

7" farebný dotykový TFT displej sa dá ovládať bavlnenými, silikónovými a gumenými rukavicami. Intuitívne užívateľské rozhranie a číslice veľkosti 18mm vám spríjemnia vaše každodenné úlohy.

Presné váhy MS-TS, 1 mg

Technické údaje	MS303TS	MS403TS	MS603TS	MS1003TS
Hraničné hodnoty				
Váživosť	320 g	420 g	620 g	1020 g
Odčítateľnosť	1 mg	1 mg	1 mg	1 mg
Opakovateľnosť	1 mg	1 mg	1 mg	1 mg
Odchýlka linearity	2 mg	2 mg	2 mg	2 mg
Typické hodnoty				
Opakovateľnosť	0,7 mg	0,7 mg	0,7 mg	0,7 mg
Odchýlka linearity	0,6 mg	0,6 mg	0,6 mg	0,6 mg
Čiľivosť (skúšobné závažie)	3 mg (300 g)	3.5 mg (400 g)	3.5 mg (600 g)	4 mg (1000 g)
Min. hmotnosť vzorky podľa USP (5% záťaž, k=2, U=0,10%)	1,4 g	1,4 g	1,4 g	1,4 g
Minimálna hmotnosť vzorky (5% záťaž, k=2, U=1%)	0,14 g	0,14 g	0,14 g	0,14 g
Doba ustálenia	1,5 s	1,5 s	1,5 s	1,5 s
Rozmery				
Rozmery misky, š×h (mm)	127 × 127	127 × 127	127 × 127	127 × 127



Zabudované aplikácie

Váženie, štatistiky pre všetky aplikácie, kontrolné váženie súčtovanie, počítanie kusov, receptúrne váženie, percentuálne váženie, váženie s faktorom, dynamické váženie, hustota, dávkovanie a PC Direct (pre ľahký prenos dát).

Vlastnosti

Presné výsledky	Snímač zafarbenia MonoBloc Silná ochrana proti prefarbeniu interná justáž FACT Funkcia MinWeigh Celokovový obal
Efektívna prevádzka	7" extra veľký farebný dotykový TFT displej 18mm vysoké číslice Funkcia LevelControl Štatistická analýza dát Ľahké čistenie LevelLock QuickLock
Zabezpečenie kvality	ISO-Log Zadanie ID vzorky Ochrana heslom
Plynulý proces	3 rozhrania: USB zariadenie, USB hosť, RS232 Opcia Bluetooth Aplikácia PC Direct

Príslušenstvo

Termotlačiareň P-5x



Rýchla, vysokorychlostná tlač na papier, samolepiace štítky a nekonečný samolepiaci papier (vrátane čiarových kódov).

Bluetooth adaptéry



Pre bezdrôtový prenos dát medzi váhou a PC, tabletom alebo tlačiarňou. Nepotrebuje žiadny ďalší softvér.

SmartPrep™



Jednorázové, antistatické lieviky umožňujúce bezpečné a rýchle naváženie práškov. Jednoducho odvážite, preneste a opláchnite.

Závažia a CarePacs®



Pre rutinné testovanie a justáž váh, so zabezpečenou nadväznosťou.

Ďalšie informácie o príslušenstve nájdete na www.mt.com/lab-accessories