

Bilance speciali per farmacie



Per farmacie

Pharmacy Line di METTLER TOLEDO è stata studiata appositamente per soddisfare le esigenze delle farmacie e semplificare così al massimo il lavoro quotidiano di pesatura.




Precisione e affidabilità

METTLER TOLEDO è sinonimo di precisione assoluta in tutte le attività di pesatura. Le bilance di Mettler Toledo sono robuste e progettate per durare a lungo.



Facilità di preparazione delle ricette

Tutte le bilance della linea Pharmacy Line sono dotate della funzione «formula». È sufficiente premere un tasto per preparare una ricetta in modo semplice e rapido.

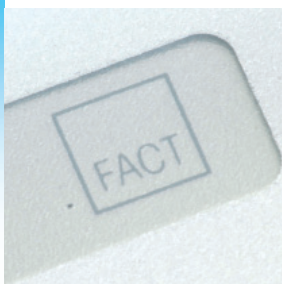

Regolazione automatica

FACT, il sistema di regolazione completamente automatico, vi offre la sicurezza di una regolazione sempre perfetta della bilancia, in qualunque condizione.



Un'assistenza sempre efficiente

Anche una bilancia robusta deve essere controllata a intervalli regolari. Affidatevi alla competenza del nostro servizio di assistenza. Controlli regolari prolungano la durata del prodotto.

www.mt.com/service



Pharmacy - La nuova linea di bilance

Le bilance trovano svariate applicazioni in farmacia. La preparazione di ingredienti attivi pregiati, ad esempio per il collirio, richiede precisione e strumenti affidabili. Per la formulazione di pomate, creme e medicinali è richiesta semplicità e precisione, mentre le miscele di té vengono spesso preparate secondo le richieste dei clienti. La qualità collaudata di METTLER TOLEDO è in grado di rispondere a qualsiasi esigenza delle farmacie per la soddisfazione di farmacisti e clienti.

www.mt.com/pharmacy

Dati tecnici – Pharmacy Line



Risoluzione	Modello	Carico massimo	Regolazione	Ripetibilità	Linearità	Dimensioni esterne (L/P/H)
0.0001g	AB104-S/MPH	110 g	FACT	0.1 mg	0.2 mg	245/321/344 mm
	AB204-S/MPH	210 g	FACT	0.1 mg	0.2 mg	245/321/344 mm

Piatto della
bilancia mm

∅ 80



0.001g	PB303-S/MPH	310 g	FACT	0.001 g	0.002 g	245/321/236 mm
	PB503-S/MPH	510 g	FACT	0.001 g	0.002 g	245/321/236 mm
	PB503-SDR/MPH	100 g/510 g	FACT	0.001 g/0.01 g	0.01 g	245/321/236 mm

∅ 100



0.01g	PB3002-S/MPH	3100 g	FACT	0.01 g	0.02 g	245/321/89 mm
	PB3002-SDR/MPH	600 g/3100 g	FACT	0.01 g/0.8 g	0.01 g	245/321/89 mm

∅ 180



0.1 g	PB6001-S/MPH	6100 g	FACT	0.1 g	0.1 g	245/321/89 mm
-------	--------------	--------	------	-------	-------	---------------

180x180



0.001g	PG1003-S/MPH	1010 g	FACT	0.0015 g	0.003 g	226/360/239 mm
--------	--------------	--------	------	----------	---------	----------------

128x128



0.01g	PG4002-S/MPH	4100 g	FACT	0.008 g	0.02 g	226/360/95 mm
	PG4002-SDR/MPH	800 g/4100 g	FACT	0.008 g/0.03 g	0.02 g/0.05 g	226/360/95 mm
	PG6002-S/MPH	6100 g	FACT	0.01 g	0.02 g	226/360/95 mm
	PG6002-SDR/MPH	1200 g/6100 g	FACT	0.01 g/0.03 g	0.02 g/0.05 g	226/360/95 mm

165x165

OIML

Tutti i modelli sono tarati. Tuttavia è possibile richiedere anche bilance non tarate.

A

Applicazioni integrate:

- Programma per la preparazione di ricette
- Funzione contatore (tranne PG-S/PH)

FACT

La funzione di regolazione interna completamente automatica FACT adatta la bilancia a qualsiasi variazione di temperatura.

Delta Range

È sufficiente premere un tasto per ottimizzare la lettura (dieci volte maggiore) nell'intera gamma di pesatura. Questa portata di precisione rappresenta il 20% della portata totale.

RS 232

Interfaccia RS232 per il collegamento al PC o alla stampante.



Visualizzazione retroilluminata o display fluorescente per facilitare la lettura dei risultati.

METAL

Corpo in metallo (pressofusione di alluminio) pregiato, chimicamente stabile, per proteggere la cella di pesatura e i circuiti elettronici.



Involucro protettivo. Ricopre il corpo in metallo per proteggerlo dallo sporco e dalle graffiature.

Dati tecnici – Prodotti speciali



Modello	PL1501-S/MO3	PL6001-S/MO3	BBA422-35LA	BBK422-35DLA
Letture	0,2 g	0,1 g	5 g/10 g	0,1 g/1 g
Carico massimo	1.510 g	6.100 g	15 kg/35 kg	7 kg/35,1 kg

LabX direct balance

Cod. prod. 11120340 Massima semplicità della raccolta dati mediante il collegamento della bilancia a un PC.

Per le farmacie attente alla BPM e alla rintracciabilità sono disponibili ulteriori modelli all'indirizzo www.mt.com



Certificato di qualità ISO 9001
Certificato ambientale ISO 14001
Internet: <http://www.mt.com>
Assistenza mondiale

Salvo variazioni tecniche
© 03/2007 Mettler-Toledo AG
Stampato in Svizzera 11795585
MCG MarCom Greifensee

Ulteriori informazioni
www.mt.com/pharmacy