


Pipet-Lite PL+

優れた性能と耐久性をより低価格で



LTS – 最良の選択

LTS™ LifeTouch™ システムはシーリングエリアが小さくポジティブストップが装備されており、チップの着脱に必要な力が少なく、完璧な密封状態を確保します。シャフトにチップを打ち込む必要はありません！ LTS はピペットシャフトの摩耗を減らし、ピペットの寿命を延ばします。

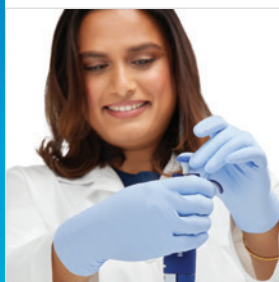

正確性と精度

Pipet-Lite PL+ は、レイニンのすべてのピペットに期待される高い正確性と精度を備え、信頼性の高い結果を提供します。



耐久性と信頼性

頑丈に設計された Pipet-Lite PL+ は、日々のラボでの厳しい使用にも耐え、長期にわたって信頼性の高い性能を提供します。



高度な機能

色分けされた容量インジケータから便利な位置に配置された容量ウィンドウまで、レイニン Pipet-Lite PL+ は、あらゆる面で効率性と片手での容易な操作を追求して設計されています。



Pipet-Lite™ PL+

研究の新しいアシスタント

レイニン Pipet-Lite PL+ は、優れた正確性と耐久性を手頃な価格で提供します。使いやすさを追求して設計されたこの堅牢なピペットは、容量の識別とチップの選択を容易にする色分けされたインジケータと、手の位置を移動することなく容量を読み取れるマイクロメーターが特徴です。

Pipet-Lite PL+

研究の新しいアシスタント

標準仕様

- 吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化
- 快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル
- ロック付き機構により、誤って容量を変更することを防止
- チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和
- LTS ピペットは、容量の識別とチップの選択が容易なように色分けされています
- エルゴノミクスを向上するプランジャーボタンの青いゴム製ノブキャップ
- SL-20PL+ モデルは、スリーブを装着することで 10 µL ロングチップに、とスリーブを外すことで 250 µL チップに適合
- LTS タイプと汎用タイプ



技術仕様

仕様

モデル	容量	最小可変容量	系統誤差		偶然誤差	
	(µL)		%	µL (±)	%	µL (≤)
SL-2 PL+ L-2 PL+	0.2	0.002	12	0.024	6.0	0.012
	1		2.7	0.027	1.3	0.013
	2		1.5	0.030	0.70	0.014
SL-10 PL+ L-10 PL+	1.0	0.02	2.5	0.025	1.2	0.012
	5.0		1.5	0.075	0.60	0.030
	10.0		1.0	0.10	0.40	0.040
SL-20 PL+ L-20 PL+	2	0.02	7.5	0.15	2.0	0.040
	10		1.5	0.15	0.50	0.050
	20		1.0	0.20	0.30	0.060
SL-100 PL+ L-100 PL+	10	0.2	3.5	0.35	1.0	0.10
	50		0.80	0.40	0.24	0.12
	100		0.80	0.80	0.15	0.15
SL-200 PL+ L-200 PL+	20	0.2	2.5	0.50	1.0	0.20
	100		0.80	0.80	0.25	0.25
	200		0.80	1.6	0.15	0.30
SL-1000PL+ L-1000 PL+	100	2	3.0	3.0	0.60	0.60
	500		0.80	4.0	0.20	1.0
	1000		0.80	8.0	0.15	1.5
SL-5000PL+ L-5000 PL+	500	5	2.4	12	0.60	3.0
	2500		0.60	15	0.20	5.0
	5000		0.60	30	0.16	8.0
S L-10 ML PL+ L-10 ML PL+	1 mL	20	5.0	50	0.60	6.0
	5 mL		1.0	50	0.20	10
	10 mL		0.60	60	0.16	16

Rainin, Pipetting 360+, Pipet-Lite, LTS, LifeTouch は、メトラー・トレド、レイニン、LLC の商標です。

製品情報

機器

品番	説明	品番	説明	容量範囲
30973077	SL-2 PL+	30973085	L-2 PL+	0.1 ~ 2 µL
30973078	SL-10 PL+	30973086	L-10 PL+	0.5 ~ 10 µL
30973079	SL-20PL+*	30973087	L-20 PL+	2 ~ 20 µL
30973080	SL-100 PL+	30973088	L-100 PL+	10 ~ 100 µL
30973081	SL-200 PL+	30973089	L-200 PL+	20 ~ 200 µL
30973082	SL-1000 PL+	30973090	L-1000 PL+	100 ~ 1000 µL
30973083	SL-5000 PL+	30973091	L-5000 PL+	500 ~ 5000 µL
30973084	SL-10MLPL+	30973092	L-10 ML PL+	1000 µl ~ 10 mL

* ボックスには延長スリーブが 1 個含まれています。

Pipet-Lite PL+ スターターキット (汎用タイプのみ)

注記: 各スターターキットには、ピペット 1 本、バルクチップ 3 袋 (1,000 チップ/袋)、空のラックが 1 つ付属しています。

品番	詳細
31021642	Pipet-Lite PL+ スターターキット SL-2PL+
31021643	Pipet-Lite PL+ スターターキット SL-10PL+
31021644	Pipet-Lite PL+ スターターキット SL-20PL+ (20µLではなく 10 µL ロング チップ)
31021645	Pipet-Lite PL+ スターターキット SL-100PL+
31021646	Pipet-Lite PL+ スターターキット SL-200PL+
31021647	Pipet-Lite PL+ スターターキット SL-1000PL+

アクセサリ

31021640	ノブキャップ PL+
31021641	延長スリーブ PL+ SL-20

メトラー・トレド株式会社

お問い合わせ: www.mt.com/contacts

仕様は予告なく変更される場合があります

© 03/2025 METTLER TOLEDO. All rights reserved

30621200 Rev C

Rainin MarCom

www.mt.com/rainin

詳細はウェブサイトをご覧ください