



## **Akıllı Pipet Standı**

Kalibrasyon Durumunu

Kontrol Edin

Servis Verilerini Görüntüleyin

Uyumluluğu Yönetin

**Zengin Özellikli, Kullanımı Kolay**  
Kolaylaştırılmış Pipet Yönetimi

**METTLER TOLEDO**

# Kolaylaştırılmış Pipet Yönetimi


## İş Akışınıza Uyumlu SmartStand

**Rainin SmartStand, yoğun çalışan ve aşağıdaki işlemleri yapmak isteyen laboratuvarlar ve laboratuvar yöneticileri için akıllı, kullanımı kolay bir pipet varlık yönetim sistemidir:**

- Servis dışı kalmayı/teknik özelliklerle ilgili masrafları azaltma
- Uyumluluğu proaktif şekilde yönetme
- Kayıt tutma ve raporlama zamanından tasarruf etme

SmartStand, her Rainin XLS ve XLS+ marka pipette bulunan RFID çipini okuyarak, dört manuel veya elektronik pipete kadar uyumluluk durumunu anında görüntüler. Bir pipet seçtiğinizde SmartStand'ın renkli LCD ekranı, pipetin servis ve kalibrasyon durumunun ayrıntılı bir görüntüsünü gösterir.

SmartStand bağımsız çalışır veya EasyDirect™ Pipet Varlık Yönetimi yazılımıyla entegre olarak laboratuvar çapında bir pipet izleme sistemi oluşturur. EasyDirect; kullanıcıların pipet kullanımını, servis için pipetleri işaretlemesini, diğer laboratuvar yönetim sistemleri (LIMS) arasında veri aktarımı yapmasını ve her pipetin RFID çipine benzersiz veriler (ürün sahibi, hızlı kontrol yöntemleri ve envanter numarası gibi) kaydetmesini sağlayarak laboratuvar yönetimini kolaylaştırır.

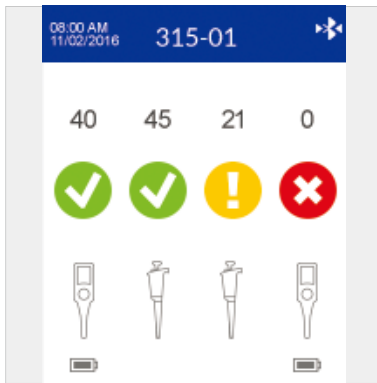

### Maliyetleri Azaltın

Teknik özelliklere uymayan ya da servis tarihlerini aşan pipetler kullanarak kendinizi savunmasız bırakmayın. SmartStand masaüstüne açıklık ve şeffaflık getirir.

### Uyumluluğu Yönetin

Pipet servisi, kalibrasyon ve periyodik performans kontrolünü proaktif şekilde yönetmek için ileri düzeyde özelleştirilebilen otomatik bir sistemle izleme işlemlerini dönüştürün.

### Zamandan Tasarruf Edin

SmartStand, pipet yönetimini basitleştirir ve kolaylaştırır. Her Rainin XLS pipette depolanan servis verilerini görüntüler ve daha kapsamlı izleme ve raporlama sistemi için EasyDirect ile entegre olur.



### SmartStand ve Askı Bir Arada!

SmartStand, bir aksesuar sabitleme kitiyle "Akıllı Askı"ya dönüşür.

Hızlı RFID okuyucular aynı anda dört pipeti tarar

Kolay okunan renkli ekran pipet durumunu gösterir

Aynı anda dörde kadar E4 pipeti şarj eder

Duvara veya rafa sökülebilir hacim başlığı bağlantıları

Dâhilî Bluetooth ve USB mini bağlantı noktası



# SmartStand ve EasyDirect™

## Güçlü Varlık Yönetimi Araçları

### SmartStand

- Esnek, ölçeklenebilir
- Manuel ve elektronik XLS ve XLS+ pipetler için
- Kullanıcı tanımlı servis/kalibrasyon aralıkları
- Periyodik performans doğrulaması için QuickCheck hatırlatıcıları
- Kolay ve anlaşılır grafik arayüzü
- 110/220 V, 50-60 Hz
- Bluetooth\* veya USB ile bağlanır
- Bağımsız olarak çalışabilir veya hacim başlığını bir rafa veya duvara monte etmek için isteğe bağlı kitleri kullanabilirsiniz

### EasyDirect Pipet Varlık Yönetimi

- Bir bilgisayara birden fazla SmartStand bağlayabilir
- Tüm pipet markalarını/modellerini izler ve yönetir
- Rainin XLS ve XLS+ pipetlerde RFID çiplerini okur/yazar
- Excel, csv veya xml'ye aktarma sağlar (ekleme, üzerine yazma veya silme)
- Otonom çalışma için otomatik dış aktarma planlayıcısı özelliği ile kolaylık sağlar
- Servis isteklerini planlar
- Sistem gereksinimleri:  
Windows 7 (SP1) veya üzeri, 5 GB boş bellek ve 4 GB RAM

Sipariş No.	Açıklama
30312897	Akıllı Şarj Standı SCS-B
30312898	Akıllı Şarj Standı SCS
30312899	Bağlama Kiti Manyetik SCS-FK-M
30313000	Bağlama Kiti Raf SCS-FK-S
30313247	Bağlama Kiti Braketi SCS-FK-B
17012879	Elektrikli Pipetler Güç Kaynağı E4-RCSWPS
30086494	ADP-BT-S Bluetooth RS232 Program Kilidi

\* SCS için Bluetooth program kilidi ADP-BT-S kullanın (Sipariş No. 30086494)

Rainin, Pipetting 360°, EasyDirect ve XLS, Mettler - Toledo Rainin, LLC'nin ticari markalarıdır.

[www.mt.com/rainin](http://www.mt.com/rainin)

Daha fazla bilgi için

### Mettler - Toledo Rainin, LLC

7500 Edgewater Drive, Oakland, CA 94621

Telefon +1 510 564 1600

Faks +1 510 564 1604

Teknik değişikliklere tabidir

© 10/2016 Mettler - Toledo Rainin, LLC

Çevrimiçi içerikten talep üzerine basılmıştır. 17701576 Rev A