



Многофункциональный стенд для зарядки пипеток

Проверка статуса калибровки

Просмотр сведений
об обслуживании

Обеспечение соответствия
нормативным требованиям

Широкий набор функций

Простое управление пипетками


Простое управление пипетками SmartStand

SmartStand — простое и эффективное решение Rainin для управления пипетками, необходимое для загруженных лабораторий. Оно обеспечивает:

- **Снижение расходов на устранение неисправностей и сопутствующих расходов;**
- **Соответствие нормативным требованиям;**
- **Экономия времени при регистрации данных и подготовке отчетов;**

Считывая данные с RFID-чипа, который находится в пипетках Rainin XLS и XLS+, SmartStand мгновенно отображает статус соответствия нормативным требованиям для четырех пипеток (механических или электронных). Цветной ЖК-дисплей отображает подробные сведения об обслуживании и статус калибровки любой выбранной пипетки.

SmartStand работает автономно или интегрируется с ПО PipetteX для управления пипетками, создавая лабораторную систему для управления ресурсами и отслеживания пипеток. ПО PipetteX упрощает управление лабораторными ресурсами: пользователи могут записывать данные об использовании пипеток, пометать пипетки, требующие обслуживания, производить обмен данными с другими системами управления лабораторией (LIMS). Все уникальные данные (сведения о владельце, методы быстрой проверки и инвентарный номер) регистрируются на RFID-чипе каждой пипетки.

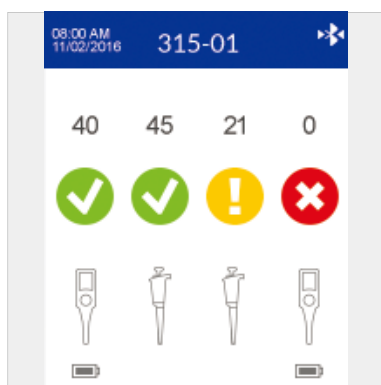

Снижение затрат

Отслеживайте пипетки, которые не соответствуют техническим требованиям или имеют просроченные даты обслуживания. SmartStand удобно разместить на рабочем столе.

Обеспечение соответствия

Оптимизируйте учет ресурсов с помощью автоматизированной, легко адаптируемой системы для упреждающего управления обслуживанием, калибровкой и периодической проверкой рабочих характеристик пипеток.

Экономия времени

SmartStand упрощает и оптимизирует управление пипетками. Стенд отображает сервисные данные, хранящиеся на каждой пипетке Rainin XLS, и интегрируется с ПО PipetteX для создания комплексной системы учета ресурсов и отчетности.



SmartStand и Hang-Up в одном!

С помощью комплекта дополнительных креплений SmartStand превращается в подвесную систему Smart Hang-Up.

RFID-считыватели сканируют четыре пипетки одновременно

Цветной дисплей с четкими символами отображает статус пипетки

На SmartStand можно заряжать до четырех пипеток E4 одновременно

Съемная головка крепится к стене или полке

Встроенные порты Bluetooth и USB-mini



SmartStand и PipetteX™

Мощная система управления пипетками

SmartStand

- Гибкость и масштабируемость.
- Для механических и электронных пипеток XLS и XLS+.
- Интервалы обслуживания/калибровки, задаваемые пользователем.
- Напоминания о необходимости проведения регулярной проверки рабочих характеристик QuickCheck.
- Интуитивно-понятный графический интерфейс.
- 110/220 В, 50/60 Гц.
- Возможность подключения через Bluetooth* или USB.
- Ставится на стол, крепится на полку или стену с помощью дополнительных комплектов для установки головки.

Программное обеспечение PipetteX для управления пипетками

- Возможность подключения к ПК нескольких SmartStand.
- Отслеживание и управление пипетками любых марок и моделей.
- Считывает и записывает данные на RFID-чипы пипеток Rainin XLS и XLS+.
- Экспорт в Excel, csv или xml (добавление, перезапись или удаление).
- Автоматический планировщик экспорта для автономной работы.
- Составление графика запросов на обслуживание.
- Системные требования:
Windows 7 (SP1) или выше, 5 Гб свободной и 4 Гб оперативной памяти.

№ для заказа	Описание
30312897	Smart Charging Stand SCS-B
30312898	Smart Charging Stand SCS
30312899	Комплект магнитных креплений SCS-FK-M
30313000	Комплект креплений, полка SCS-FK-S
30313247	Комплект креплений, кронштейн SCS-FK-B
17012879	Источник питания для электронных пипеток E4-RCSWPS
30086494	Аппаратный ключ ADP-BT-S Bluetooth RS232

* Для системы SCS используйте ключ Bluetooth ADP-BT-S (№ для заказа 30086494).

Rainin, Pipetting 360°, PipetteX и XLS являются торговыми марками Mettler-Toledo Rainin, LLC.

www.mt.com/rainin

Дополнительная информация

МЕТТАЕР ТОЛЕДО СНГ

101000 Москва, Сретенский бульвар, 6/1
Тел.: (495) 777-70-77
E-mail: inforus@mt.com

Возможны изменения технических характеристик.

© 10/2016 МЕТТАЕР ТОЛЕДО СНГ

Напечатано в России. 17701577, ред. А