



インテリジェントピペットスタンド  
校正状態を確認  
サービスデータを表示  
コンプライアンスの管理

## さまざまな特長と簡単な操作 Pipette Management Simplified

## Pipette Management Simplified


SmartStandはあなたのワークフローにフィットします

メトラー・トレドのレイニンSmartStandは、インテリジェントかつ使いやすいピペットアセット管理システムで、多忙なラボや以下の課題を抱えるラボ管理者に適しています。

- 使用不能やスペックアウトから生じるコストを減らしたい
- コンプライアンスを積極的に管理したい
- 記録管理や報告書にかかる時間を削減したい

SmartStandは、すべてのレイニンXLS/XLS+ ブランドピペットのRFIDチップを読み取って、最大4本の手動ピペットまたは電動ピペットのコンプライアンス状態をすぐに表示します。ピペットを持ち上げると、SmartStandのカラーLCDスクリーンがピペットのサービスおよび校正状態の詳細表示に切り替わります。

SmartStandは、単独でまたはEasyDirect™ピペットアセット管理ソフトウェアを組み合わせることにより、ラボ全体のピペットアセット管理/監視システムとなります。EasyDirectは、ユーザーがピペットの使用を記録したり、サービス中のピペットにフラグを付けたり、他のラボ管理システム (LIMS) 間でデータを転送することを可能にするとともに、各ピペットのRFIDチップに固有のデータ (オーナー、クイックチェック方法、在庫番号) を記録することにより、ラボのアセット管理を簡便化します。

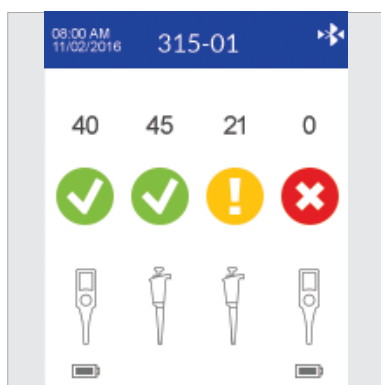

### コストを削減

スペックアウトしていたり、サービス期限を過ぎているピペットにも油断しないでください。SmartStandは卓上のすべてを明瞭化かつ透明化します。

### コンプライアンスの管理

ピペットのサービス、校正、定期性能試験の積極的な管理のために改変され、高度にカスタマイズ可能な自動化システムを伴って監視を行います。

### 時間の節約

SmartStandはピペット管理を簡便化し、かつ合理化します。すべてのレイニンXLSピペット上に保管されたサービスデータを表示します。EasyDirectを統合すればさらに広範囲のアセットに対するトラッキング/レポートシステムが得られます。



### SmartStandとHang-Upを一体化!

SmartStandは、アクセサリ固定キットの付いた「Smart Hang-Up」へと変わります。

高速RFIDリーダーが4本のピペットを同時にスキャン

読み取りやすいカラースクリーンにピペットの状態を表示

E4ピペットを4本まで同時に充電

取り外し可能なヘッドで壁や棚に取り付け

内蔵BluetoothおよびUSBミニポート



# SmartStandとEasyDirect™

## 強力なアセット管理ツール

### SmartStand

- フレキシブルで拡張可能
- 手動および電動XLS/XLS+ ピペット用
- ユーザーが定義するサービス/校正の実施サイクル期間
- 定期性能検証用QuickCheckリマインダー
- 直感的にわかるグラフィックインターフェイス
- 110/220V、50-60Hz
- Bluetooth\* またはUSB接続
- スタンドアロン状態でまたはオプションキットを使用して、壁や棚にヘッドを取り付け

### EasyDirectによるピペットアセット管理

- 複数のSmartStandをPCに接続
- あらゆるブランド/モデルのピペットを監視および管理
- レイニンのXLSおよびXLS+ ピペット上にあるRFIDチップのデータを読み出し/書き込み
- Excel、csvまたはxmlデータとしてエクスポート（付加、上書きまたは削除）
- 自律操作の自動エクスポートスケジューラー
- サービスリクエストをスケジューリング
- システム要件:  
Windows 7 (SP1) 以上、空きメモリー5 GB、RAM 4 GB

品番	説明
30312897	スマート充電スタンドSCS-B
30312898	スマート充電スタンドSCS
30312899	マグネット式固定キットSCS-FK-M
30313000	棚用固定キットSCS-FK-S
30313247	ブラケット式固定キットSCS-FK-B
17012879	電動ピペット用電源E4-RCSWPS
30086494	ADP-BT-S Bluetooth RS232 dongle

\* SCSにはBluetooth dongle ADP-BT-S (品番30086494) を使用

[www.mt.com/rainin](http://www.mt.com/rainin)

詳細はウェブサイトをご覧ください

#### メトラー・トレド株式会社 レイニン事業部

〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7 池之端日殖ビル6F  
TEL: 03-5815-5515 FAX: 03-5815-5525

●製品の仕様・価格は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください

●価格に消費税は含まれておりません

©11/2016 Mettler-Toledo K.K.

Printed in Japan 96170370