

智慧型微量分注器支架

檢查校正狀態

檢視維修資料

管理合規性



眾多功能、簡單操作
簡化微量分注器管理

簡化微量分注器管理


SmartStand 適用於您的工作流程

Rainin SmartStand 為智慧型且簡單易用的微量分注器資產管理系統，適用於繁忙的實驗室和欲達成下列目標的實驗室經理：

- 降低超出維修/規格相關之成本
- 主動管理合規性
- 節省紀錄保存與報告之時間

SmartStand 藉由讀取每個 Rainin XLS 和 XLS+ 品牌微量分注器上的 RFID 晶片，即可立即顯示高達四個微量分注器的合規性狀態 – 不論是手動或電動。拿起微量分注器而 SmartStand 的彩色 LCD 螢幕可切換為詳細檢視微量分注器維修和校正狀態。

SmartStand 可獨立運作或與 EasyDirect™ 微量分注器資產管理軟體整合，以打造實驗室廣泛的微量分注器資產管理與追蹤系統。EasyDirect 簡化實驗室資產管理，讓使用者可以記錄微量分注器之使用、標記維修的微量分注器、在不同的實驗室管理系統 (LIMS) 中傳輸資料，並且可利用各個微量分注器的 RFID 晶片以記錄獨特資料 (如擁有者、快速檢查方法和庫存號碼)。

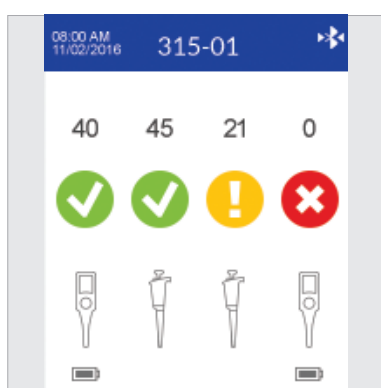

降低成本

別讓分注器因為不合規格或超出維修日期而產生支出。SmartStand 能為台秤帶來清晰性和透明度。



管理合規性

以自動化且可高度自訂的系統，能讓您以截然不同的方式來主動管理微量分注器的維修、校正和定期效能檢查。



省時

SmartStand 簡化微量分注器之管理。可顯示儲存於每個 Rainin XLS 微量分注器上的維修資料，並與 EasyDirect 整合以達更為全面性的資產追蹤與回報系統。



SmartStand 和單一掛架！

SmartStand 可用於「智慧型掛架」，可搭配配件固定套件。

快速 RFID 讀取機可一次掃描四支微量分注器

簡明易讀的顯示器可呈現微量分注器狀態

最多可同時使用四支 E4 微量分注器

可拆卸頭部可安裝至牆面或架上

內建藍牙與 USB 迷你連接埠



SmartStand 與 EasyDirect™

功能強大的資產管理工具

SmartStand

- 具擴充性與彈性
- 可用於手動和電動的 XLS 和 XLS+ 微量分注器
- 使用者定義的維修/校正時間間隔
- QuickCheck 提醒定期效能驗證
- 直覺式圖形介面
- 110/220V, 50-60 Hz
- 透過藍牙* 或 USB 連線
- 獨立式或使用選配套件以將頭部安裝至架上或牆上

EasyDirect 微量分注器資產管理

- 可將多個 SmartStands 連接至電腦
- 可追蹤並管理所有品牌/型號的微量分注器
- 可於 Rainin XLS 和 XLS+ 微量分注器上的 RFID 晶片上進行讀寫
- 匯出為 Excel、csv 或 xml (附加、覆寫或刪除)
- 自動匯出排程進行自發性操作
- 安排維修要求
- 系統要求：
Windows 7 (SP1) 或更高版本, 5GB 的自由記憶體與 4 GB 的 RAM

訂單編號	說明
30312897	智慧型充電支架 SCS-B
30312898	智慧型充電支架 SCS
30312899	固定套件磁性 SCS-FK-M
30313000	固定套件架 SCS-FK-S
30313247	固定套件托架 SCS-FK-B
17012879	電動微量分注器電源供應 E4-RCSWPS
30086494	ADP-BT-S 藍牙 RS232 加密器

* 針對 SCS 使用藍牙加密器 ADP-BT-S (訂單編號: 30086494)

www.mt.com/rainin

瞭解更多資訊

Mettler-Toledo Rainin, LLC

7500 Edgewater Drive, Oakland, CA 94621
電話 +1 510 564 1600
傳真 +1 510 564 1604

技術資料將不定期變更。

© 10/2016 Mettler-Toledo Rainin, LLC
為網路內容印製 PB-269 Rev A (A4)