

专用移液器

轻松掌控，触手可及 灵活地吸液与分液




速度可调，灵活操作

可轻松调节吸液和分液速度，灵活处理不同类型的溶液和培养基，保护敏感细胞。



轻巧易用

符合人体工学的设计使其重量轻、平衡性佳，易于手持。配备桌面支架，可将设备暂时放在支架上，便于下次使用。

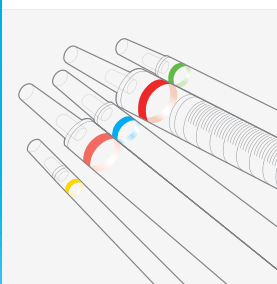

应用范围广

匹配所有类型的1 mL至100 mL血清和微量移液管，可转移0.1 mL至100 mL的液体。



持久耐用

一次充电可运行15小时；充电10分钟即可运行长达1小时。



Rainin SP电动助吸器 轻巧易用

Rainin SP融合了卓越的人体工学设计以及先进的技术，具有业界最快的充电速度，可快速轻松地满足您最具挑战性的液体处理需求。

Rainin SP电动助吸器

Rainin SP可转移0.1 mL至100 mL的液体体积, 有助于降低成本, 适用于任何类型的血清移液管 (1 mL、2 mL、5 mL、10 mL、15 mL、25 mL、50 mL和100 mL)。

具体应用

- 细胞培养
- 细菌和酵母培养
- 样品制备 (DNA/RNA/ 蛋白提取)

转移液体类型

- 缓冲液
- 化学溶液
- 培养基

使用环境

- 实验工作台
- 生物安全柜以及化学通风橱



订货信息

产品型号	产品描述	物料号
Rainin SP电动助吸器 (中国)	Rainin SP电动助吸器	30671413
Rainin SP电动助吸器	Rainin SP电动助吸器	30671414
磁吸挂充™	磁吸挂充	30671310
桌面支架	桌面支架	30621248
电源适配器	电源适配器	30671311
吸液口套管	吸液口套管	30621241
防水滤芯 (未灭菌)	防水滤芯 (未灭菌) (1个)	30621244
防水滤芯 (无菌型)	防水滤芯 (无菌型) (1个)	30695285
硅胶软管	硅胶软管	30621247

RAININ, Pipetting 360和挂充™是Mettler-Toledo Rainin, LLC.的商标。

梅特勒-托利多集团

实验室部门

本地联系方式: www.mt.com/contacts

如有技术更改, 恕不另行通知

© 11/2021 METTLER TOLEDO. 保留所有权利。

30743872B

Rainin MarCom

mt.com/Rainin-SP

了解更多信息