

Штативы для наконечников

Меньшая масса. Безотходная переработка



TerraRack™ — это новое слово в технологии изготовления штативов для наконечников пипеток. Эти штативы весят в два раза меньше, чем обычные, при этом они сохраняют высокую прочность и полностью пригодны для повторной переработки.

TerraRack — это стерильные одноразовые штативы с откидной крышкой, которые не прогибаются при установке одно- или многоканальных пипеток, даже если прикладывается большое усилие. Для их производства требуется в два раза меньше пластмассы, чем для большинства обычных штативов для наконечников. Они легко прессуются при утилизации и в основном изготавливаются из ПЭТФ, допускающего вторичную переработку. Это тот же материал, который используется при изготовлении бутылок для напитков.

- Стерильные
- С фильтром и без фильтра
- Индивидуальная упаковка
- Безотходная переработка
- На 50 % меньше масса
- На 50 % меньше отходов
- Вкладываются один в другой
- BioClean Ultra™

TerraRack

На 50 % меньше пластмассы

Штативы TerraRack позволяют решить большую проблему, с которой сталкиваются в лабораториях по всему миру: что делать с использованными штативами?

Отработанные штативы занимают много места и составляют значительный объем пластмассовых отходов. Если стоимость утилизации зависит от массы, то их утилизация обходится дорого. Штативы TerraRack выгодно отличаются. Они весят в два раза меньше, чем стандартные штативы, а после использования их можно вставлять один в другой или прессовать, чтобы значительно сократить занимаемый объем.

Упаковка TerraRack с откидной крышкой и передней защелкой изготовлена из ПЭТФ (полиэтилентерефталата) — исключительно прочной и легкой термопластмассы, которая легко поддается переработке. Полипропиленовая платформа для наконечников фиксируется в упаковке, повышая структурную жесткость при минимальной массе. Соединение крышки с основанием предотвращает проникновение пыли.

Штативы TerraRack с наконечниками Rainin BioClean Ultra™ предлагаются как для пипеток LTS™ (оснащенных системой LifeTouch™), так и для универсальных пипеток. Доступны варианты с фильтром, без фильтра и с технологией ShaftGuard™. Все наконечники TerraRack поставляются стерильными.

Одноразовое использование означает, что штативы всегда будут новыми и чистыми




Индивидуальная упаковка

Штативы TerraRack индивидуально упакованы для защиты от загрязнений и внешних воздействий.



Стерильность


Штативы TerraRack поставляются стерильными, поэтому для них не требуется автоклавирование (штативы TerraRack нельзя автоклавировать).

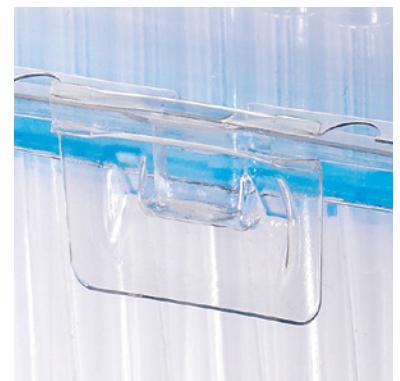

Защита

Откидная крышка и защелка защищают наконечники и предотвращают утечку жидкости даже при падении. Особая конструкция крышки предотвращает попадание пыли.

Масса штатива для наконечников объемом 200 мкл

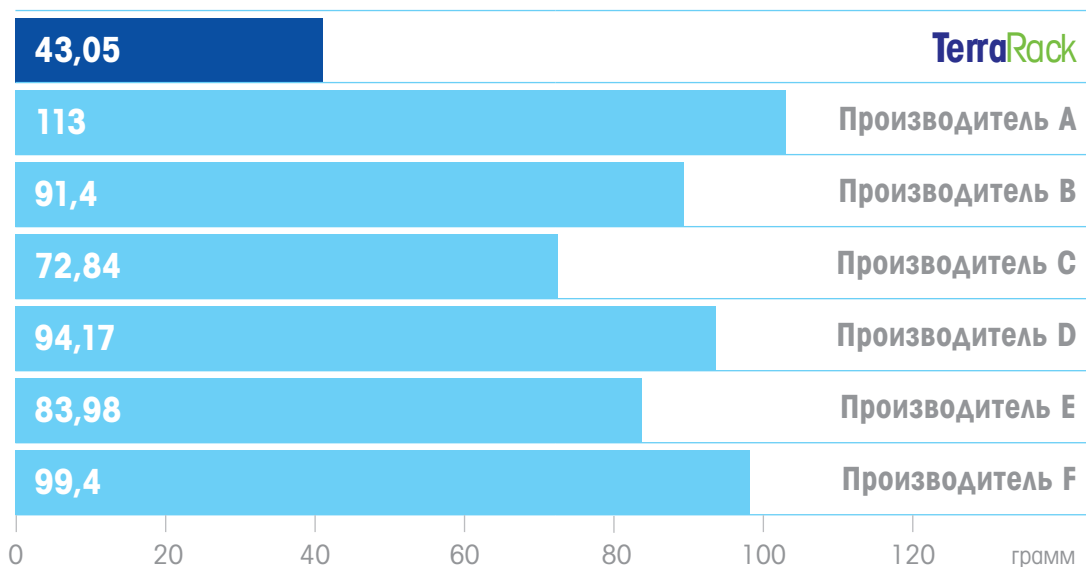

Меньше вес — меньше отходов

Инженеры Rainin разработали передовую конструкцию и использовали альтернативный вид пластмассы, чтобы значительно сократить количество материала, необходимого для изготовления легкого штатива, который выдерживает все нагрузки, возникающие при пипетировании. Штативы TerraRack не дают отходов при переработке и еще более экологичны благодаря уменьшению объема пластмассы, попадающей в цикл утилизации.

TerraBase

За счет прочного многоразового основания TerraBase™ штатив для наконечников TerraRack выглядит солиднее и привычнее. Основание TerraBase изготовлено из прозрачного поликарбоната с опорами из силикона. Оно пригодно для автоклавирования, устойчиво к воздействию химических веществ и рассчитано на многолетнюю эксплуатацию.





Наконечники LTS TerraRack для пипеток Rainin LTS™

Номер для заказа	Описание	Макс. нагрузка
Наконечники TerraRack LTS в штативах TerraRack из ПЭТФ с откидной крышкой		
17014960	TR LTS, 20 мкл, S 960A/10 960 наконечников LTS в 10 штативах, стерильные	20 мкл
17014961	TR LTS, 20 мкл, F 960A/10 960 наконечников LTS в 10 штативах, стерильные, с фильтром	20 мкл
17014962	TR LTS, 250 мкл, S 960A/10 960 наконечников LTS в 10 штативах, стерильные	200 мкл
17014963	TR LTS, 200 мкл, F 960A/10 960 наконечников LTS в 10 штативах, стерильные, с фильтром	200 мкл
17014964	TR LTS, 300 мкл, S 768A/8 768 наконечников LTS в 8 штативах, стерильные	300 мкл
17014965	TR LTS, 300 мкл, F 768A/8 768 наконечников LTS в 8 штативах, стерильные, с фильтром	300 мкл
17014966	TR LTS, 1000 мкл, S 768A/8 768 наконечников LTS в 8 штативах, стерильные	1000 мкл
17014967	TR LTS, 1000 мкл, F 768A/8 768 наконечников LTS в 8 штативах, стерильные, с фильтром	1000 мкл
17014968	TR LTS, 1200 мкл, S 768A/8 768 наконечников LTS в 8 штативах, стерильные	1200 мкл
17014969	TR LTS, 1200 мкл, F 768A/8 768 наконечников LTS в 8 штативах, стерильные, с фильтром	1200 мкл



Универсальные наконечники TerraRack

Для пипеток Rainin, Pipetman® и всех марок пипеток с универсальным держателем

Номер для заказа	Описание	Макс. нагрузка
Универсальные наконечники TerraRack в штативах TerraRack из ПЭТФ с откидной крышкой		
17014970	TR UNV, 10 мкл, S 960A/10 960 наконечников в 10 штативах, стерильные	10 мкл
17014971	TR UNV, 10 мкл, F 960A/10 960 наконечников в 10 штативах, стерильные, с фильтром	10 мкл
17014972	TR UNV, 10 мкл, GS 960A/10 960 наконечников ShaffGard в 10 штативах, стерильные	10 мкл
17014973	TR UNV, 10 мкл, GF 960A/10 960 наконечников ShaffGard в 10 штативах, стерильные, с фильтром	10 мкл
17014974	TR UNV, 20 мкл, F 960A/10 960 наконечников в 10 штативах, стерильные, с фильтром	30 мкл
17014975	TR UNV, 100 мкл, F 960A/10 960 наконечников в 10 штативах, стерильные, с фильтром	100 мкл
17014976	TR UNV, 200 мкл, F 960A/10 960 наконечников в 10 штативах, стерильные	250 мкл
17014977	TR UNV, 250 мкл, S 960A/10 960 наконечников в 10 штативах, стерильные, с фильтром	200 мкл
17014978	TR UNV, 300 мкл, S 768A/8 768 наконечников в 8 штативах, стерильные	300 мкл
17014979	TR UNV, 300 мкл, F 768A/8 768 наконечников в 8 штативах, стерильные, с фильтром	300 мкл
17014980	TR UNV, 1000 мкл, S 768A/8 768 наконечников в 8 штативах, стерильные	1000 мкл
17014981	TR UNV, 1000 мкл, F 768A/8 768 наконечников в 8 штативах, стерильные, с фильтром	1000 мкл

TerraBase

TerraBase — это эффективный и экономичный вариант, который обладает функциональностью и экологическими преимуществами штатива TerraRack, но по форме и весу аналогичен обычному штативу.

Номер для заказа	Описание
TerraBase для TerraRack	
17014982	TR-SB Низкое основание TerraRack, 1 шт., для штативов TerraRack 10–300 мкл
17014983	TR-TB Высокое основание TerraRack, 1 шт., для штативов TerraRack 1000/1200 мкл

ТОРГОВЫЕ МАРКИ RAININ: Rainin, Pipetting 360°, LTS, BioClean, LiteTouch, ShaffGard, TerraRack и TerraBase являются торговыми марками Mettler-Toledo Rainin, LLC. Pipetman является зарегистрированной торговой маркой компании Gilson, Inc.



Компания МЕТТАЛЕР ТОЛЕДО

Лабораторное оборудование

Адреса местных представительств: www.mt.com/contacts

www.mt.com/rainin

Дополнительная информация

Возможны изменения технических характеристик.

© 02/2021 г. Mettler-Toledo Rainin, LLC

Распечатано по запросу на основе электронной версии. 17701573, ред. С