

レイニン リサーチグレード汎用チップ

優れた品質、清浄度、性能

様々なピペットに適合するチップをお探しではありませんか？

■ 主要ブランドピペット製品に小さな力でスムーズに装着できるよう設計



リサーチグレード ピペットチップ



リサーチグレード 詰め替え用チップ



クリーンさを保証

■ 適合表 (2ページ目にも記載があります) サンプルチップ依頼受付中 ▶ www.mt.com/JP-RG_sample

メーカー / ブランド名	シリーズ名	容量	RG 汎用チップ	RG 汎用フィルターチップ		
サーモフィッシャー Thermo	FINNPIPETTE F1,F2,F3	0.2-2 μ L	10/10X	✓	10F/10FX	✓
		1-10 μ L	10/10X	✓	10F/10FX	✓
		2-20 μ L	250	✓	20F	✓
		10-100 μ L	250	✓	20F/100F/200F	✓
		20-200 μ L	250	✓	20F/100F/200F	✓
		100-1000 μ L	1000	✓	1000F	✓
	FINNPIPETTE F2 Multi-Channel	1-10 μ L (8 channels)	10/10X	✓	10F/10FX	✓
		10-100 μ L (8 channels)	250	✓	20F/100F/200F	✓
20-300 μ L (8 channels)		250	✓	20F/100F/200F	✓	
ザルトリウス Sartorius	Tacta	0.1-3 μ L	10/10X	✓	10F/10FX	✓
		0.5-10 μ L	10/10X	✓	10F/10FX	✓
		2-20 μ L	250	✓	20F	✓
		20-200 μ L	250	✓	20F/100F/200F	✓
		100-1000 μ L	1000	✓	1000F	✓
	ProLine	0.1-2.5 μ L	10/10X	✓	10F/10FX	✓
		0.5-10 μ L	10/10X	✓	10F/10FX	✓
		20-200 μ L	250	✓	20F/100F/200F	✓
		100-1000 μ L	1000	✓	1000F	✓
	ProLine Plus	0.1-3 μ L	10/10X	✓	10F/10FX	✓
		0.5-10 μ L	10/10X	✓	10F/10FX	✓
		100-1000 μ L	1000	X	1000F	X
	mLine	2-20 μ L	250	✓	20F	✓
		20-200 μ L	250	✓	20F/100F/200F	✓
		10-100 μ L (8 channels)	250	X	20F/100F/200F	✓
		ProLine Plus Multi-Channel	0.5-10 μ L (8 channels)	10/10X	✓	10F/10FX
	10-100 μ L (8 channels)		250	X	20F/100F/200F	✓
エッペンドルフ eppendorf	Research / Research Plus / Reference 2	0.1-2.5 μ L			10F	X
			10/10X	✓	10FX	✓
		0.5-10 μ L	10/10X	✓	10F/10FX	✓
		2-20 μ L metal nozzle	10/10X	✓	10F/10FX	✓
		2-20 μ L Plastic nozzle	250	✓	20F/100F	✓
		10-100 μ L	250	✓	20F/100F	✓
		20-200 μ L	250	✓	20F/100F/200F	✓
		100-1000 μ L	1000	✓	1000F	✓
	Research Plus / Reference 2 Multi-Channel	0.5-10 μ L (8/12 channels)	10/10X	✓	10F/10FX	✓
		10-100 μ L (8/12 channels)	250	✓	20F/100F	✓
30-300 μ L (8/12 channels)		250	X	20F/100F	✓	
ギルソン GILSON	Pipetman	0.2-2 μ L	10/10X	✓	10F/10FX	✓
		1-10 μ L	10/10X	✓	10F/10FX	✓
		2-20 μ L	250	✓	20F	✓
		20-200 μ L	250	✓	20F/100F/200F	✓
		100-1000 μ L	1000	✓	1000F	✓

✓: 適合 / X: 不適合

METTLER TOLEDO




■ 適合表 サンプルチップ依頼受付中 ▶ www.mt.com/JP-RG_sample

メーカー / ブランド名	シリーズ名	容量	RG 汎用チップ		RG 汎用フィルターチップ	
ニチリョー Nichiryo	Nichipet EX II Nichipet EX Plus II Nichipet Premium	0.1-2 μ L	10/10X	✓	10F/10FX	✓
		0.5-10 μ L	10/10X	✓	10F/10FX	✓
		2-20 μ L	250	✓	20F	✓
		20-200 μ L	250	✓	20F/100F/200F	✓
		100-1000 μ L	1000	✓	1000F	✓
ブランド Brand		0.5-10 μ L (12 channels)	10/10X	✓	10F/10FX	✓

✓: 適合 / X: 不適合

■ リサーチグレードピペットチップ 高度な成型 – 優れたチップ

レイニンリサーチグレードピペットチップはレイニン、ギルソン、ザルトリウス、エッペンドルフ、サーモフィッシャー、ニチリョーを含むほとんどの主要ブランドピペット製品に小さな力でスムーズに装着できるように設計されています。製造時のリアルタイムのチップ目視検査とチップ品質試験により、潜在的にチップの性能を下げる可能性のある不具合の発生を防いでいます。クラス100,000のクリーンルーム条件下でチップの成型やパッケージングがされており、チップの汚染を防いでいます。

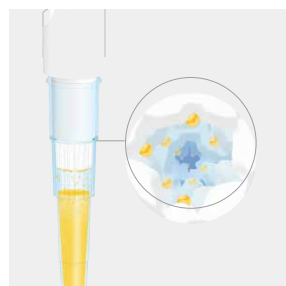

レイニンチップのフィルター素材

他社で使用されているカルボキシメチルセルロース (carboxymethyl cellulose, CMC) はレイニンのフィルターには使用されていません。この素材は、PCR阻害になります。レイニンチップのフィルターは、微粒ポリエチレンが熱加工されています。数多くの超微細孔があり、入り組んだ空気の通り道をもつ3次元構造です。エアゾールは、フィルター内部に接触すると、空気の通り道の超微細孔でストップされます。



クリーンさを担保したチップ

レイニンチップは、Class100,000のクリーンルームで製造されます。不純物の無いバージンポリプロピレン素材がサイロ（貯蔵庫）から鋳型射出成型マシンに直接送られ、人間との接触を防いでいます。チップの各ロットは厳格にテストされ、検出する生物学的汚染物質が存在しないことが証明されています。



品質の良さ 長年の評価

レイニンの精緻に成型されたピペットチップはその液切れの良さ、品質、清浄性で長年各国の研究所で評判を得てきました。レイニンファインポイントチップ™のデザインと厳格な品質テストにより正確性の高いピペットチップを実現しています。



ヒンジラック

フタを片手で簡単に開けて閉めることが可能です。ラックは積み重ねができ、省スペースです。ラックを容量により分りやすく色を変えています。ラック縁が存在せず、マルチチャンネルも全チャンネル、部分チャンネルのいずれも使用可能です。

■装着が簡単、正確なピペッティング リサーチグレードチップはほとんどすべてのピペットメーカーに適合

● 高品質、清浄性

リサーチグレードチップは、生物学的汚染なしを担保

● コンタミネーションを防ぐフィルター滅菌チップ

エアゾールによるピペット汚染を防ぐ熱加工ポリプロピレン製滅菌フィルター

● 細長く狭い容器用の微量ロングチップ

10 μ L用ロングチップは、バルク（袋）入り（未滅菌）とラック入り未滅菌・滅菌・フィルター滅菌タイプでご提供



※写真は10 μ L～1000 μ Lまでの6品種のフィルターチップの原寸大サイズになります。

リサーチグレードピペットチップ 使用期限と製造日情報

■ 使用期限

未滅菌チップ：製造日から5年間

滅菌・フィルター滅菌：製造日から3年間

■ 製造日情報

BATCHを参照（下記をご確認ください）

1. RG HRC（ラックタイプ）未滅菌、滅菌、フィルター滅菌チップ

ラックラベル

XX XX
月
年

HRC UNV 1000 μ L F 768C/8
Batch: 2104 TC: 05112

例: 2104 は 2021 年 4 月が製造年月日との意味

2. RG Refill（詰め替えタイプ）未滅菌、滅菌チップ

スタックラベル

XX XX
月
年

30537475



Pipette Tips
RSC UNV 250 μ L S 960C/10

Batch: 2107

例: 2107 は 2021 年 7 月が製造年月日との意味

ボックスラベル

ラックラベルと同様です

XX XX
月
年

30537522



Pipette Tips
HRC UNV 200 μ L F 960C/10

Batch: 2107 QC: 1

例: 2107 は 2021 年 7 月が製造年月日との意味

ボックスラベル

パッチコード記載はありません

Pipette Tips
RSC UNV 250 μ L S 960C/10

Qty: 16

UNV



30537475

製品情報



ＬＴＳタイプはありません

	品 番	製品名	容 量	数 量		特 徴			価 格
			最大容量	ラック数/カートン	チップ/カートン	滅菌済	ロングチップ	フィルタ	
ラック	30374654	HRC UNV 10μL 960C/10	10 μL	10	960				¥6,300
	30374657	HRC UNV 10μL S 960C/10	10 μL	10	960	✓			¥7,300
	30374660	HRC UNV 10μL F 960C/10	10 μL	10	960	✓		✓	¥13,400
	30537525	HRC UNV 10μL X 960C/10	10 μL	10	960		✓		¥6,300
	30537526	HRC UNV 10μL SX 960C/10	10 μL	10	960	✓	✓		¥7,300
	30537527	HRC UNV 10μL FX 960C/10	10 μL	10	960	✓	✓	✓	¥13,400
	30374661	HRC UNV 20μL F 960C/10	20 μL	10	960	✓		✓	¥13,400
	30537521	HRC UNV 100μL F 960C/10	100 μL	10	960	✓		✓	¥13,400
	30537522	HRC UNV 200μL F 960C/10	200 μL	10	960	✓		✓	¥13,400
	30374655	HRC UNV 250μL 960C/10	250 μL	10	960				¥6,300
	30374658	HRC UNV 250μL S 960C/10	250 μL	10	960	✓			¥7,300
	30374656	HRC UNV 1000μL 768C/8	1000 μL	8	768				¥6,300
	30374659	HRC UNV 1000μL S 768C/8	1000 μL	8	768	✓			¥7,300
	30537523	HRC UNV 1000μL F 768C/8	1000 μL	8	768	✓		✓	¥13,400
詰め替え	30537471	RSC UNV 10μL 960C/10	10 μL	10	960				¥5,700
	30537474	RSC UNV 10μL S 960C/10	10 μL	10	960	✓			¥6,700
	30537472	RSC UNV 250μL 960C/10	250 μL	10	960				¥5,700
	30537475	RSC UNV 250μL S 960C/10	250 μL	10	960	✓			¥6,700
	30537473	RSC UNV 1000μL 768C/8	1000 μL	8	768				¥5,700
	30537476	RSC UNV 1000μL S 768C/8	1000 μL	8	768	✓			¥6,700
バルク	30537470	RC UNV 10μL 1000C/1	10 μL		1000				¥2,700
	30537524	RC UNV 10μLX 1000C/1	10 μL		1000		✓		¥2,800
	30537469	RC UNV 250μL 1000C/1	250 μL		1000				¥2,700
	30537468	RC UNV 1000μL 1000C/1	1000 μL		1000				¥3,300

レイニン リサーチグレード汎用チップと一緒に

レイニン手動シングルピペット ピペットライト PL+

- お手頃価格 28,000円より
- 優れたパフォーマンス正確性と再現性
- 手や親指に優しいエルゴノミック機能
- 1000 μL, 5000 μL, 10mLは腐食耐性素材ピストン使用
- メンテナンスが楽で簡単 面倒なテフロンシール不使用

Pipet-Lite PL+ 汎用タイプ (SL)	品 番	品 名	容量範囲	価 格
	30231217	SL-2PL+	0.1 ~ 2 μL	¥28,000
	30231218	SL-10PL+	0.5 ~ 10 μL	¥28,000
	30231219	SL-20PL+	2 ~ 20 μL	¥28,000
	30231220	SL-100PL+	10 ~ 100 μL	¥28,000
	30231221	SL-200PL+	20 ~ 200 μL	¥28,000
	30231222	SL-1000PL+	100 ~ 1000 μL	¥28,000
	30231223	SL-5000PL+	500 ~ 5000 μL	¥36,400
	30231224	SL-10MLPL+	1000 μL ~ 10mL	¥36,400



www.mt.com/JP-RG_sample

詳細はウェブサイトへ

メトラー・トレド株式会社 レイニン事業部
TEL:03-5815-5515

代理店名

©10/2021 Mettler-Toledo K.K.,

- 製品の仕様・価格は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 価格に消費税は含まれておりません。
- 価格は2021年の価格になります。