

シンプルな水分率測定

高い信頼性と費用対効果



明るく鮮明なディスプレイ


大きな数字と鮮明なLCDディスプレイにより、どのような明るさでも情報と結果の読み取りが簡単です。



3ステップの簡単操作

操作が非常にわかりやすいため、誰でも水分率測定を実行できます。

1. 空の計量皿の風袋引きをします
2. サンプルを均一に広げます
3. 蓋を閉じて開始するだけで、わずか数分で結果が表示されます

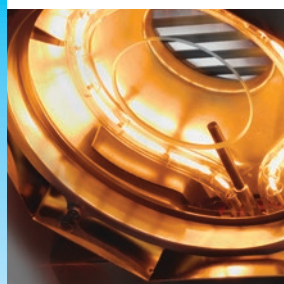

手頃な価格で品質維持

卓越したハロゲン乾燥テクノロジーと高性能計量セルにより、HE73はお客様の投資に見合う価値をご提供します。堅牢な金属製ハウジングと清掃が簡単なステンレス鋼製の表面により、HE73は長年にわたり信頼性の高い性能を発揮します。



すばやいメソッド選択

HE73には、定義済みのメソッドパラメータからすばやく選択できる2つのメソッドボタンがあり、サンプルの最適な乾燥を保証します。



HE73 ハロゲン水分計

HE73ハロゲン水分計は、日常的に使用するあらゆるサンプルで信頼性の高い水分含有量測定ができる、操作が簡単な頼れる機器です。ディスプレイ上に表示されるガイダンス、3ステップの簡単な操作、保存済みの2つのメソッドにより、すばやく効率的に水分率測定を実施できます。オペレーターのトレーニングは不要です。堅牢な計量テクノロジーと高精度のハロゲン加熱により、この費用対効果の高い機器では高い投資収益率を実現できます。

HE73の特長:

- 自動/手動開始モード
- 日時の組み込み
- カスタマイズ可能なスイッチオフ基準
- 機器に組み込まれたSmartCal検査
- プリンタの容易な接続

HE73

ハロゲン水分計

ハロゲンによる加熱

正確な温度制御による高い乾燥精度

鮮明なディスプレイ

読み取りやすい表示

プログレスインジケータ

リアルタイムで測定
の進捗状況を確認

プリンタ用のRS232接続

迅速でエラーのない文書化

堅牢な構造


省スペース型の清掃が簡単な設計

計量装置

高性能の計量セル

メソッドボタン

すばやいメソッド選択

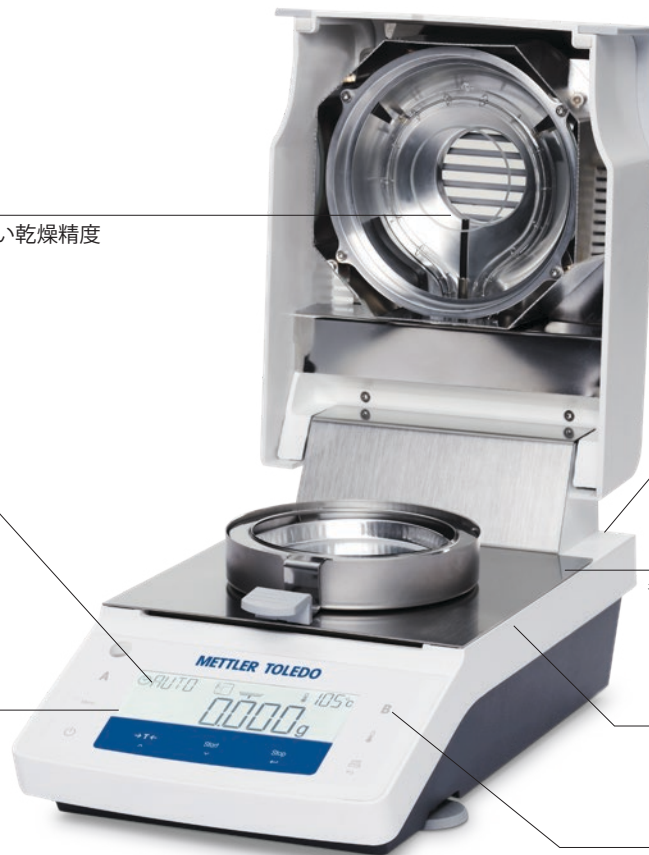

技術データ

繰返し性	0.15% (2gサンプル) 0.05% □ 10gサンプル)
乾燥プログラム	標準、高速
最小表示	1mg、0.01%MC
メソッドメモリ件数	2
保存結果数	1
推奨%MC	1.0~100%MC
結果の表示	プログレスインジケータ
スイッチオフ基準	1個の自動、時間指定 (1~120分)、フリー
乾燥温度	50~200 °C □ 1 °Cきざみ)
点検/調整	温度調整100 °C/160 °C 機器に組み込まれたSmartCal検査 外部点検用分銅50g
表示モード	%MC、%DC、%AM、%AD、g
インターフェイス	RS232
ひょう量	71g
ディスプレイ	バックライト付きLCD
寸法 (幅 x 奥行き x 高さ)	183 x 334 x 161mm (カバーを開けた状態 で341mm)

SmartCal™ 検査用物質

	品番
SmartCalスターターパック	30005917
cSmartCalスターターパック (認証済み)	30005918
SmartCal (12個入)	30005792
cSmartCal12 (認証済み、12個入)	30005793
SmartCal (24個入)	30005790
cSmartCal24 (認証済み、24個入)	30005791

www.mt.com/smartcal



HE73

水分計の消費電力

機器の定常状態	およその消費電力 (W) *
スタンバイ	3
100 °C	60
160 °C	90

* サンプルを使用せず115Vと230Vの最適な条件下でメトラー・トレドが実施したテスト結果。

水分計用アクセサリ

		品番
サンプル処理	使い捨てアルミ皿	00013865
	ファイバーパット	00214464
品質マネジメント	温度キット (校正証明書付き) - HE	30134141
	調整 (校正) 用分銅50g	30402574
その他のアクセサリ	保護カバー	30209145
	換気口フィルタ - HC/HE	11113883
	換気口フィルタハウジング - HC/HE	30216118
	プリンタ (RS-P25/00など)	30702967



使い捨てアルミ皿

www.mt.com/moisture

詳しくはウェブサイトへ

METTLER TOLEDO Group
Laboratory Weighing
Local contact: www.mt.com/contacts

メトラー・トレド株式会社
ラボテック事業部
Tel. 03-5815-5515
Fax. 03-5815-5525

Subject to technical changes
© 07/2025 METTLER TOLEDO. All rights reserved
Group MarCom RITM1207948 MB/NM

© 07/2025 Mettler-Toledo K.K.,
30622811B
製品仕様は予告なく変更することがあります。