

EasyDirect™ 수분 소프트웨어를 통한 간단한 데이터 관리



자동으로 데이터 수집

최대 5대의 기기에서 수분 데이터 수집. SQL 데이터베이스를 기반으로 한 전자 데이터 취급 덕분에 수기 오류를 최소화하고 시간을 절약하며 데이터를 안전하게 저장할 수 있습니다.



효율적인 결과 처리

날짜, 기기, 사용자 또는 샘플별로 결과를 간편하게 확인하고 필터링합니다. 차트로 결과를 시각화하고 효율적인 결과 분석을 위해 통계를 수행하십시오.



간편한 보고

수분 함량 결과에 대한 간단하고 명확한 보고서를 생성합니다. 데이터를 다양한 형식(CSV, XML 또는 PDF)으로 PC로 내보내거나 네트워크 프린터에서 인쇄합니다.



중앙 기기 관리

기기가 항상 최신 상태이며 정확한 수분 측정 결과를 제공할 준비가 되어 있는지 확인하십시오. 기기 상태를 모니터링하고 일상 테스트 및 서비스 일정을 세우십시오.




수분 분석 결과 데이터 취급이 쉬워집니다

수분 분석기를 EasyDirect Moisture PC 소프트웨어에 연결하여 데이터 관리 및 취급을 개선해 보십시오. 설치와 준비 과정이 간단하고 신속하며, 조작 방식이 직관적입니다.


수분 측정 업무 프로세스의 효율성 개선: 수분 데이터를 자동으로 수집하고 보고서를 생성하며 제어 차트에서 결과를 시각화하고 통계를 수행하여 기기를 중앙에서 관리하십시오.

다음 주소에서 45일 무료 평가판 다운로드:


▶ www.mt.com/Moisture-Software

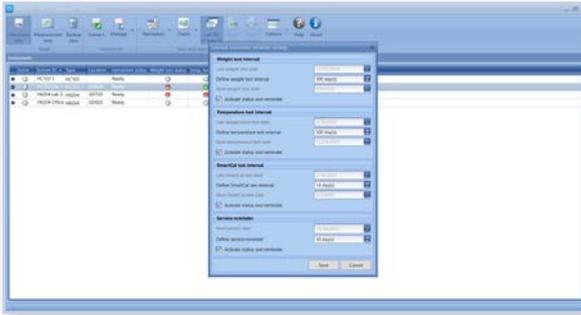


기기 일상 테스트 일정 수립

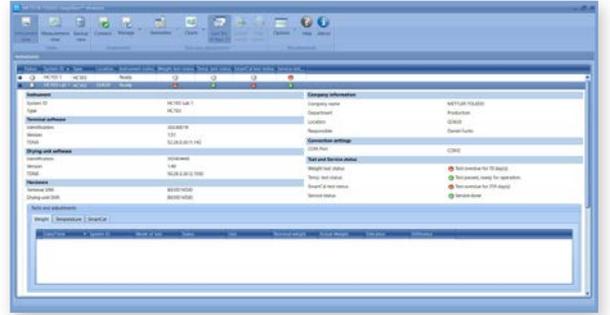

모니터 테스트 및 서비스 상태

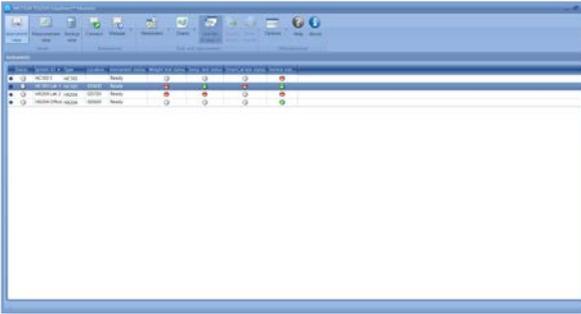

기기 개요

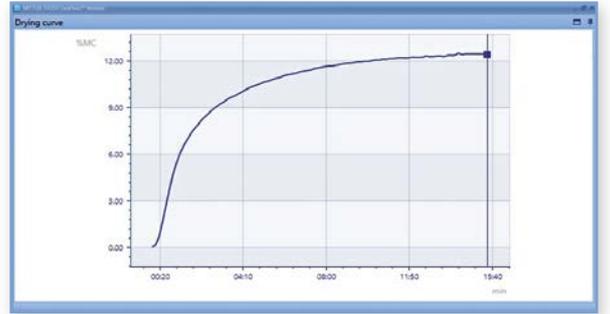

건조 곡선 시각화

기술 설명

지원 장비	HX204, HS153, HC103	
최대 기기 개수	5	
연결성	HC103	USB, RS232
	HX204, HS153	USB, RS232, Ethernet, Wi-Fi
데이터베이스	SQL Express 2022	
PC 요건	운영체제: OS: Windows 10 (Update ≥ 20H2), Windows 11 64-bit	
데이터 수집	측정 결과, 테스트 및 조정 결과	
보고서 형식	PDF, CSV, XML	
기기 관리	일상 테스트 및 서비스 일정 계획 및 알림, 기기 및 상태 개요	
보호	설정 및 결과 암호로 보호	
언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 폴란드어, 체코어, 헝가리어, 포르투갈어, 일본어, 중국어, 한국어	