


# Очевидная эффективность

## Достоверные результаты



### Небольшой вес

Благодаря эргономичной конструкции легких многоканальных пипеток Rainin Pipet-Lite XLS+ исключительный комфорт и эффективность сохраняются даже после долгих часов работы. Это легкие, прочные и хорошо сбалансированные пипетки для комфорта и качества мирового уровня.

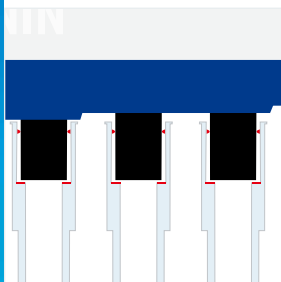

### Легчайшее прикосновение

Система Rainin LiteTouch отличается эргономичностью и простотой эксплуатации. Запатентованная конструкция ствола и наконечника LTS с малой площадью уплотнения и жестким упором обеспечивает быструю и герметичную установку наконечников по всем каналам. Наконечники сбрасываются просто и с меньшим усилием.



### Полный контроль

Пипетки Pipet-Lite XLS+ отличаются четким и быстрым откликом. Это самые простые в управлении многоканальные пипетки. Ход плунжера плавный и абсолютно стабильный по всей длине хода.



### Исключительно высокие рабочие характеристики

Равномерная подача образца по всем каналам, надежное уплотнение, простота установки наконечника и минимальное усилие сброса — отличительные особенности многоканальных пипеток Rainin.



### Многоканальные пипетки Pipet-Lite XLS+

Высочайшая точность и производительность

Многоканальные пипетки Rainin Pipet-Lite™ XLS™+ — самые современные и эргономичные ручные многоканальные пипетки на рынке. Благодаря технологии Rainin LiteTouch™ (LTS™) наконечники на эти многоканальные пипетки устанавливать очень легко. Пипетки отличаются высокой точностью и воспроизводимостью отбора по всем каналам. Прочные пипетки, изготовленные из материалов высочайшего качества, рассчитаны на годы надежной работы. Все пипетки Rainin XLS имеют встроенную RFID-метку для отслеживания калибровочных данных.

# Многоканальные пипетки Pipet-Lite XLS+

## Очевидная эффективность

### Расширенные функциональные возможности

- 8- или 12-канальный формат при объеме от 1 до 1200 мкл.
- LTS – стабильность отбора образцов по всем каналам.
- Быстрая установка и передовая система сброса наконечников.
- Надежное герметичное уплотнение.
- Эргономичная рукоятка с упором для пальцев.
- Фиксатор объема предотвращает дрейф.
- Сбрасыватель наконечника со встроенным амортизатором для уменьшения напряжения большого пальца.
- RFID-метки для управления всеми пипетками в лаборатории.



## Технические характеристики

### Технические характеристики

Модель	Объем (мкл)	Шаг (мкл)	Погрешность		Прецизионность	
			%	мкл (±)	%	мкл (≤)
10 мкл	1,0	0,02	4	0,04	5	0,05
	5,0		1,5	0,075	1,5	0,075
	10,0		1	0,1	0,5	0,05
20 мкл	2	0,02	7,5	0,15	4	0,08
	10		1,5	0,15	1,5	0,15
	20		1	0,2	0,5	0,1
50 мкл	5	0,05	3,5	0,18	2	0,1
	25		1,2	0,3	0,5	0,125
	50		0,8	0,4	0,4	0,2
200 мкл	20	0,2	2,5	0,5	1,2	0,24
	100		0,8	0,8	0,25	0,25
	200		0,8	1,6	0,3	0,6
300 мкл	30	0,5	2,5	0,75	1,5	0,45
	150		0,8	1,2	0,3	0,45
	300		0,8	2,4	0,25	0,75
1200 мкл	100	2	3,6	3,6	1	1
	600		0,8	4,8	0,3	1,8
	1200		0,8	9,6	0,2	2,4

### Информация для оформления заказа

Номер для заказа	Описание	Диапазон объемов
8 каналов		
17013802	L8-10XLS+	0,5–10 мкл
17013803	L8-20XLS+	2–20 мкл
17013804	L8-50XLS+	5–50 мкл
17013805	L8-200XLS+	20–200 мкл
17013806	L8-300XLS+	20–300 мкл
17014496	L8-1200XLS+	100–1200 мкл
12 каналов		
17013807	L12-10XLS+	0,5–10 мкл
17013808	L12-20XLS+	2–20 мкл
17013809	L12-50XLS+	8–50 мкл
17013810	L12-200XLS+	20–200 мкл
17013811	L12-300XLS+	20–300 мкл
17014497	L12-1200XLS+	100–1200 мкл



### МЕТТЛЕР ТОЛЕДО СНГ

Возможны изменения технических характеристик.  
© 03/2018 МЕТТЛЕР ТОЛЕДО СНГ.  
Напечатано в России. 17701567 Ред. J



ТОРГОВЫЕ МАРКИ RAININ: Rainin, Pipet-Lite, XLS, LTS, Pipetting 360° и LiteTouch являются торговыми марками Mettler-Toledo Rainin, LLC.

[www.mt.com/rainin](http://www.mt.com/rainin)

Дополнительная информация