


Yüksek Performans Güvenebileceğiniz Sonuçlar



Hafif

Hafif Rainin çok kanallı Pipet-Lite XLS+'nin ergonomik tasarımı, saatlerce pipetlemeden sonra bile olağanüstü konfor ve performans sunar. Gerçekten birinci sınıf bir uyum ve son kat ile dengeli ve belirgin bir his verir.

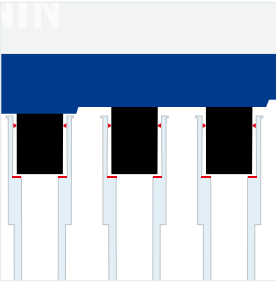

En hafif dokunuş

Rainin LiteTouch System, en iyi ergonomi ve kullanım kolaylığını sunar. Küçük sızdırmazlık sistemi ve pozitif durdurma özelliği bulunan patentli LTS mil ve uç tasarımı, tüm kanallarda hızlı ve mükemmel sızdırmazlık sağlar. LTS ve progresif çıkarma ile uçlar daha az kuvvetle kolayca çıkarılır.



Üstün kontrol

Benzersiz kontrol ve fark edilen rahatlığıyla Pipet-Lite XLS+ bundan sonra kullanacağınız en kolay ve duyarlı çok kanallı pipettir. Sağlama hareketi düzgündür ve baştan sona kesinlikle tutarlıdır.



Üstün performans

Tüm kanallarda tutarlı numune çekimi, sızdırmaz uyum, kolay uç takma ve en az güçle uç çıkarma Rainin çok kanallı pipetlerinin en önemli özellikleridir.



Pipet-Lite XLS+ Çok Kanallı Eşsiz Hassasiyet ve Performans

Rainin çok kanallı Pipet-Lite™ XLS™+, piyasadaki teknik ve ergonomik olarak en gelişmiş manuel çok kanallı pipettir. Rainin LiteTouch™ Sistemi (LTS™) teknolojisi ile donatılmış olan bu çok kanallı pipet hızlı yüklenir, elinize oturur ve tüm kanallarda hassas ve tutarlı numune seçme olanağı sunar. Sağlam yapılmıştır ve hassas malzemelerle bu çok kanallılar yıllarca tutarlı, güvenilir hizmet vermek üzere tasarlanmıştır. Ve tüm Rainin XLS pipetleri gibi, dahili RFID etiketi gelişmiş kalibrasyon izlemesi sağlar.

Pipet-Lite XLS+ Çok Kanallı Pipetleri

Yüksek Performans

Gelişmiş İşlevsellik

- 1 ila 1200 µl hacimler için 8 ve 12 kanallı biçimler
- Tüm kanallarda tutarlı numune seçme için LTS ile
- Hızlı kolay uç takma ve çıkarma
- Güvenilir sızdırmaz conta – her zaman
- Parmak kancalı ergonomik tutma yeri tasarımı
- Hacim ayarlama kilidi sapmayı önler
- Dahili uç çıkarıcı darbe emici baş parmak gerilimini azaltır
- Varlık yönetimi için pipetin RFID etiketleri sorgulanabilir



Teknik Veriler

Teknik Özellikler

Model	Hacim (µl)	Arttırma (µl)	Doğruluk		Hassasiyet	
			%	µl (±)	%	µl (±)
10 µl	1,0	0,02	4	0,04	5	0,05
	5,0		1,5	0,075	1,5	0,075
	10,0		1	0,1	0,5	0,05
20 µl	2	0,02	7,5	0,15	4	0,08
	10		1,5	0,15	1,5	0,15
	20		1	0,2	0,5	0,1
50 µl	5	0,05	3,5	0,18	2	0,1
	25		1,2	0,3	0,5	0,125
	50		0,8	0,4	0,4	0,2
200 µl	20	0,2	2,5	0,5	1,2	0,24
	100		0,8	0,8	0,25	0,25
	200		0,8	1,6	0,3	0,6
300 µl	30	0,5	2,5	0,75	1,5	0,45
	150		0,8	1,2	0,3	0,45
	300		0,8	2,4	0,25	0,75
1200 µl	100	2	3,6	3,6	1	1
	600		0,8	4,8	0,3	1,8
	1200		0,8	9,6	0,2	2,4

Sipariş Bilgileri

MT Sipariş No.	Tanım	Hacim Aralığı
8 Kanallı		
17013802	L8-10XLS+	0,5–10 µl
17013803	L8-20XLS+	2–20 µl
17013804	L8-50XLS+	5–50 µl
17013805	L8-200XLS+	20–200 µl
17013806	L8-300XLS+	20–300 µl
17014496	L8-1200XLS+	100–1200 µl
12 Kanallı		
17013807	L12-10XLS+	0,5–10 µl
17013808	L12-20XLS+	2–20 µl
17013809	L12-50XLS+	5–50 µl
17013810	L12-200XLS+	20–200 µl
17013811	L12-300XLS+	20–300 µl
17014497	L12-1200XLS+	100–1200 µl



Mettler-Toledo Rainin, LLC

Teknik değişikliklere tabidir
© 03/2018 Mettler-Toledo Rainin, LLC
İsviçre'de basılmıştır 17701566 Rev J



RAININ TİCARİ MARKALARI: RAININ, Pipet-Lite, XLS, LTS, Pipetting 360° ve LiteTouch, Mettler-Toledo Rainin, LLC'nin ticari markalarıdır.

www.mt.com/rainin

Für weitere Informationen