

Entretien de pipettes



Entretien de pipette TotalCare®

Précision supérieure

Délai court

Service garanti

Entretien de toutes les marques

Service TotalCare®

pour des pipettes de performances exceptionnelles


METTLER TOLEDO

Plans de service sur place ou au dépôt

Une once de prévention

« Mieux vaut prévenir que guérir. » – Ben Franklin

Chez METTLER TOLEDO et Rainin, nous sommes mordus de Ben Franklin et de sa méthode simple et dynamique. En observant ses conseils, nous avons développé un but simple : réduire le stress additionnel et le coût reliés aux pipettes hors du seuil de tolérance en prévenant les situations avant qu'elles ne se produisent.

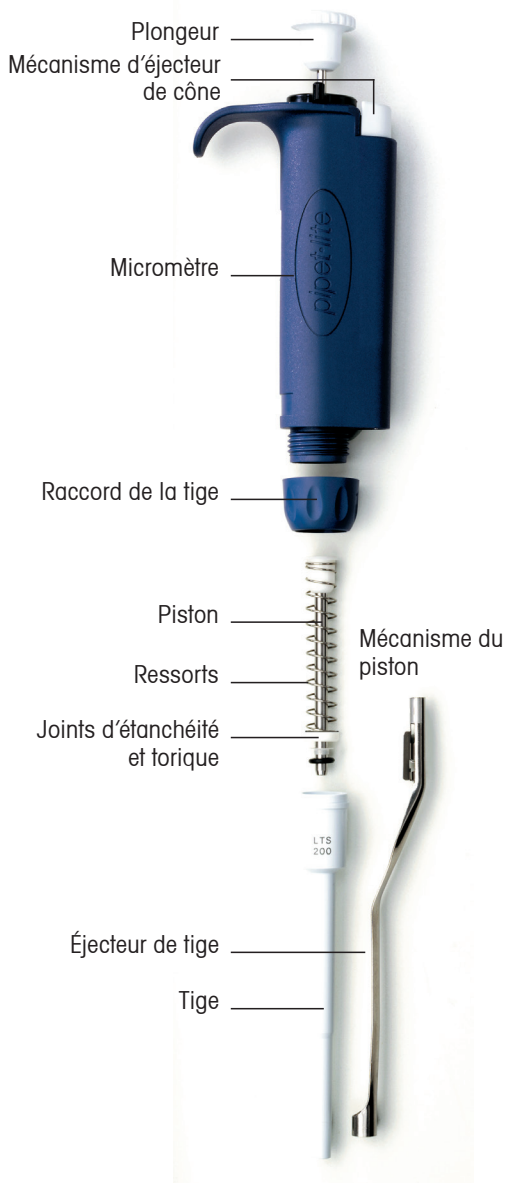

MP «sur place»			
CaIPM A	CaIPM B	CaIPM B EMO*	
■	■	■	Dépôt et réparation disponibles
■	■	■	Remplacement annuel de pièces ou graissage inclus
■	■	■	Test de données « avant réglage »
■	■	■	test de données « Après réglage »
■	■	■	Certificat d'étalonnage ISO9001
■	■	■	Certificat d'étalonnage ISO17025 (frais supplémentaires)
■	■	■	Délai d'exécution de 48 heures (en dépôt)
■	■	■	Délai d'exécution le même jour (sur place)
■	■	■	Maintenance préventive et étalonnages réalisés selon des lignes directrices très strictes
■	■	■	Vérification des fuites et fonctionnelle
■	■	■	Expédition gratuite entre votre installation et le dépôt
■	■	■	Service sur place au laboratoire du client; inspection en 12 points
■	■	■	Environnement contrôlé
■	■	■	Rappel pour un entretien prévu
■	■	■	Garantie de 12 mois sur la main-d'oeuvre et les pièces

*EMO = Option de mesure étendue

Activités d'entretien	Avantage
Remplacement des joints d'étanchéité, des pistons et des tiges usés	Réduit le risque et les pannes
Nettoyage de la pipette et graissage	Assure un fonctionnement sans pépin et ergonomique
Vérification sous pression des fuites	Conserve l'intégrité des joints



Nous entretenons tous les modèles de pipettes de tous les fabricants, MÊME LES PIPETTES MULTICANAUX!



METTLER TOLEDO offre des ensembles de services sur place personnalisés pour toute une gamme de produits, de la solution de maintenance préventive sur place à l'option tout inclus de maintenance préventive et d'étalonnage B avec EMO.

		Exigences des clients	Avantages pour le client
MP «sur place»	Maintenance préventive sur place	Aucune exigence de certification Fiabilité des pipettes élevée Solution abordable Rapport sur la qualité des pipettes	Maintenance préventive afin de prévenir le mauvais fonctionnement de pipette Service sur place pratique Contrôle des dépenses inattendues Documentation élémentaire
CaIPM A	Étalonnage	Respect des budgets serrés Vérifications selon les spécifications Certification documentée	Option la moins chère Conformité garantie aux spécifications ISO 8655 Pipettes fiables
CaIPM B	Étalonnage et maintenance préventive	Fiabilité de pipette accrue Minuterie et précision certifiées Fréquence de contrôle réduite Conformité aux exigences de GMP/GLP	Empêche les pannes de pipettes Maximise le temps de recherche Délai de maintenance rapide pour une meilleure disponibilité Documentation GMP/GLP avec traçabilité des résultats Données « Avant réglage » et « Après réglage »
CaIPM B EMO	Étalonnage et maintenance préventive avec option de mesure étendue	3 volumes, 10 pesages Conformité aux exigences GMP/GLP Fiabilité de pipette accrue Minuterie et précision certifiées	Niveau de données le plus élevé Documentation GMP/GLP Données « Avant réglage » et « Après réglage » Conformité garantie aux spécifications ISO 8655

Pipettes et conformité GMP/GLP

Les normes GMP/GLP exigent que les fabricants de produits alimentaires, des médicaments, d'appareils médicaux et de produits biologiques étalonnent, nettoient et entretiennent leurs instruments (y compris les pipettes) à des intervalles convenables. Veuillez consulter METTLER TOLEDO pour établir un plan de service personnalisé pour vos pipettes. Comparativement à d'autres fournisseurs de service, il s'agit du plan offert le plus complet et abordable.

Pourquoi choisir METTLER TOLEDO?

Quand vient le temps de choisir un fournisseur de service de pipettes, de nombreux facteurs sont à considérer.

Cependant, tenez-compte de ceci :

METTLER TOLEDO est un spécialiste en matière d'entretien et de fabrication de pipettes, ainsi qu'un spécialiste indiscutable en matière de pesage. Grâce à cela, vos pipettes seront étalonnées non seulement conformément aux normes réglementaires les plus exigeantes (service au dépôt ou sur place certifié 17025), mais aussi à l'aide de l'équipement de pesage le plus précis au monde, les balances METTLER TOLEDO.

Ainsi, pourquoi confier votre service d'entretien de pipettes à quelqu'un d'autre?

METTLER TOLEDO et les autres fournisseurs de services

	METTLER TOLEDO	ENTREPRISE A	ENTREPRISE B	
Service de base	■	■	■	Avant réglage : évaluation gravimétrique en l'état de livraison de votre installation
	■	■	■	Inspection : par une évaluation de la fonctionnalité de la pipette
	■	■	■	Système d'étanchéité : vérification visuelle et sous pression des fuites
	■	■	■	Service : nettoyage, étalonnage et réglage au besoin
	■	■	■	En l'état retourné : évaluation gravimétrique conforme aux spécifications du fabricant
	■	■	■	Documentation : étiquette de pipette, rapport/certificat, historique de la pipette
Suppléments	■	NON	NON	Pièces incluses
	■	NON	NON	Expédition au dépôt inclus
	■	?	?	Délai d'exécution éprouvé de 48 heures
	48 \$	76 \$	56 \$	

www.mt.com/pipetteservice

Pour obtenir de plus amples renseignements

Mettler-Toledo, Inc.




Canada

2915, Argentia Road, unité 6
Mississauga (Ontario) L5N 8G6
Téléphone : 1 800 METTLER
Télécopieur : 1 800 786-0042

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

METTLER TOLEDO^{MD} est une marque déposée de Mettler-Toledo Inc.
LSV-1311-LIT

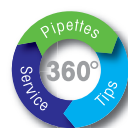

55 % de fibre recyclée
avec 30 % de déchets de consommation