


Cônes à faible rétention sans PFAS

Pour des résultats précis

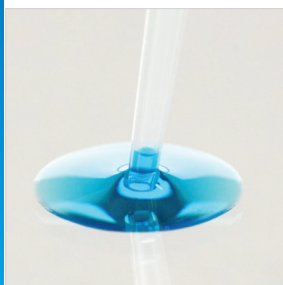

Surface hydrophobe uniforme

Les liquides glissent le long de la surface du cône, maximisant ainsi l'éjection des liquides tout en réduisant l'adhérence de l'échantillon. Idéaux pour les liquides visqueux, à faible tension de surface et précieux contenant des protéines, des enzymes, de l'ADN et de l'ARN.

Réduction de l'impact environnemental

Un nouvel additif non lixiviant crée une surface hydrophobe sans substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), aussi appelées « polluants éternels ». Avec les mêmes performances optimales que tous les cônes Rainin à faible rétention, le changement est on ne peut plus simple.



Élimination de l'incertitude

La fabrication et l'utilisation des PFAS font l'objet d'une réglementation de plus en plus stricte, ce qui contraint certains fournisseurs à retirer certains produits du marché et à en limiter la disponibilité dans certaines régions. Opter pour une alternative sans PFAS permet d'éliminer ces risques.



Qualité Rainin d'origine

Fabriqué à partir de polypropylène vierge dans des salles blanches de classe 100 000, avec une intervention humaine minimale. La certification BioClean Ultra™ garantit que les cônes sont exempts d'ADN, de DNase, de RNase et d'ATP, d'inhibiteurs de PCR, de protéases, de protéines et d'endotoxines.



Cônes hydrophobes à faible rétention Sans PFAS

Obtenez des résultats précis à partir d'échantillons précieux grâce aux cônes hydrophobes à faible rétention Rainin d'origine. La surface uniforme et hydrophobe réduit la perte d'échantillons et optimise l'éjection de liquides précieux et complexes. Alors que de nombreux cônes à faible rétention utilisent des « polluants éternels » indésirables, ces nouveaux cônes Rainin sont exempts de PFAS, comme la plupart des cônes Rainin d'origine. Et comme tous les cônes Rainin d'origine, ils préservent l'intégrité de chaque échantillon grâce à des matériaux de haute qualité et à une certification BioClean Ultra™ rigoureuse.

Cônes hydrophobes à faible rétention

Sans PFAS

- Surface hydrophobe uniforme réduisant la rétention des échantillons
- Performances équivalentes pour tous les cônes Rainin à faible rétention
- Idéal pour les échantillons précieux et les réactifs coûteux
- Disponibles en portoirs avec système LiteTouch™ (LTS™) ; stérilisés et avec filtre : en volumes de 20, 200, 300, 1 000 et 1 200 µl



Étiquetage clair

Tous les portoirs de cônes LR sans PFAS sont clairement étiquetés.

Normes de pureté Rainin



Contaminants testés	Niveaux de détection
RNase	≤ 10 ⁻⁹ unités Kunitz/µl
DNase	≤ 10 ⁻⁷ unités Kunitz/µl
ADN humain	< 0,32 pg
ADN bactérien	<1 pg
Endotoxines	≤0,001 EU/ml
ATP (adénosine triphosphate)	< 2 x 10 ⁻¹² mg/µl
Protéines	< 2 ng/ligne (aucune bande visible)
Protéase	≤500 ng/ml
Inhibiteurs de PCR	Aucun détecté

Références de commande

Référence MT	Description
31126111	Cônes de pipette RT LTS 20 µl FH 960A/10
31126110	Cônes de pipette RT LTS 200 µl FH 960A/10
31126112	Cônes de pipette RT LTS 300 µl FH 768A/8
31126109	Cônes de pipette RT LTS 1 000 µl FH 768A/8
31126113	Cônes de pipette RT LTS 1 200 µl FH 768A/8

Rainin, Pipetting 360+, BioClean Ultra, LiteTouch et LTS sont des marques déposées de Mettler-Toledo, Rainin, LLC.

Groupe METTLER TOLEDO

Contact local : www.mt.com/contacts

www.mt.com/rainin

Pour plus d'informations.

Sous réserve de modifications techniques
© 07/2026 METTLER TOLEDO. Tous droits réservés
31138183B-α
Rainin MarCom