


Puntas de baja retención sin PFAS

Obtenga resultados exactos

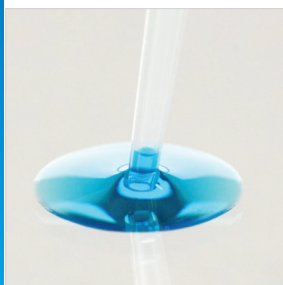

Superficie hidrofóbica uniforme

Los líquidos se deslizan sobre la superficie de la punta, maximizando la expulsión de líquidos y minimizando la adhesión de la muestra. Ideales para líquidos viscosos, de baja tensión superficial y valiosos que contienen proteínas, enzimas, ADN y ARN.



Bajo impacto medioambiental

Un novedoso aditivo no lixiviable crea una superficie hidrofóbica sin sustancias per- y polifluoroalquiladas (PFAS), conocidas como «químicos eternos». Con el mismo rendimiento excelente que todas las puntas de baja retención de Rainin, el cambio es sencillo.



Eliminar la incertidumbre

La fabricación y el uso de PFAS están cada vez más regulados, lo que obliga a algunos proveedores a descatalogar productos y reducir su disponibilidad en algunas regiones. El cambio a una alternativa sin PFAS elimina estos riesgos.



Calidad Rainin auténtica

Fabricadas con polipropileno virgen en salas limpias de clase 100 000 con una interacción humana mínima. La rigurosa certificación BioClean Ultra™ garantiza que las puntas estén libres de ADN, DNasa, RNasa y ATP, inhibidores de PCR, proteasas, proteínas y endotoxinas.



Puntas hidrofóbicas de baja retención Sin PFAS

Obtenga resultados precisos de muestras valiosas con las puntas de baja retención hidrofóbicas originales de Rainin. Una superficie uniforme e hidrofóbica reduce la pérdida de muestras y maximiza la expulsión de líquidos con muestras valiosas y líquidos difíciles. Aunque muchas puntas de baja retención utilizan aditivos «químicos eternos» no deseados, estas nuevas puntas Rainin no contienen PFAS, al igual que la mayoría de las puntas originales de Rainin. Y, al igual que todas las puntas originales de Rainin, protegen la integridad de cada muestra con materiales de alta calidad y la rigurosa certificación BioClean Ultra™.

Puntas hidrofóbicas de baja retención Sin PFAS

- La superficie hidrofóbica uniforme minimiza la retención de la muestra
- Rendimiento equivalente en todas las puntas de baja retención Rainin
- Ideal para muestras valiosas y reactivos caros
- Disponibles en racks como sistema LiteTouch™ (LTS™); esterilizadas y filtradas: en volúmenes de 20, 200, 300, 1000 y 1200 µl



Etiquetado claro
Todos los racks de puntas LR sin PFAS están claramente etiquetados.

Estándar de pureza de Rainin



Contaminantes analizados	Niveles de detección en pruebas
RNasa	≤10 ⁻⁹ unidades Kunitz/µL
DNasa	≤10 ⁻⁷ unidades Kunitz/µL
ADN humano	<0,32 pg
ADN bacteriano	< 1 pg
Endotoxina	≤ 0,001 EU/ml
ATP	<2 × 10 ⁻¹² mg/µl
Proteína	< 2 ng/carril (sin banda visible)
Proteasa	≤ 500 ng/ml
Inhibidores de PCR	Ninguno detectado

Información para pedidos

Referencia de MT	Descripción
31126111	Puntas pipeta RT LTS 20 µl FH 960A/10
31126110	Puntas pipeta RT LTS 200 µl FH 960A/10
31126112	Puntas pipeta RT LTS 300 µl FH 768A/8
31126109	Puntas pipeta RT LTS 1000 µl FH 768A/8
31126113	Puntas pipeta RT LTS 1200 µl FH 768A/8

Rainin, Pipetting 360+, BioClean Ultra, LiteTouch y LTS son marcas comerciales de Mettler-Toledo Rainin, LLC.

METTLER TOLEDO Group
Contacto: www.mt.com/contacts

Sujeto a modificaciones técnicas
© 06/2026 METTLER TOLEDO. Reservados todos los derechos.
31138184B
Rainin MarCom

www.mt.com/rainin
Para más información